

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

RAPPORT GLOBAL DEFINITIF

IMMUNOESSAIS

ENQUETE 2026/1

* AR 03/12/1999

Sciensano/Immunoessais/165/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
VANTORRE Audrey	Coordinateur	TEL:	02/642.57.55		
		E-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be		
LENGA Yolande	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642.53.96		
		E-mail:	yolande.lenga@sciensano.be		
Experts		Institution			
Prof. Van Dalem Annelien		Universitair Ziekenhuis Brussel (UZB)			
Prof. Billen Jaak		UZ Leuven			
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven		EpiCURA - Hornu			
Apr. Klin. Biol. Piqueur Marian		ZAS			
Prof. Cavalier Etienne		CHU Liège			
Prof. Gruson Damien		Cliniques Universitaires Saint Luc			
Apr. Klin. Biol. Oyaert Matthijs		Uz Gent			
Prof. Vermeersch Pieter		UZ Leuven-KU Leuven			
Apr. Klin. Biol. Catry Emilie		CHU UCL Namur – UCLouvain			
Dr. Dubois Nathalie		CHU Liège			

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le: 15/05/2026

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'experts du: 22/05/2026

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations.

La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête Immunoessais est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par A. Vantorre, coordinateur.

Date de publication : 29/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-immunoessais>

TABLE DES MATIERES

TABLE DE CONVERSION – IMMUNOESSAIS.....	5
INTRODUCTION	6
HOMOGÉNÉITÉ DES ÉCHANTILLONS	6
STABILITÉ DES ÉCHANTILLONS.....	6
LA VALEUR CIBLE	6
MISE À JOUR DES TROUSSES.....	6
TROUSSES PÉRIMÉES	6
COMMENT ENCODER DES RÉSULTAT CENSURÉS (< OU > QUE LA VALEUR SEUIL) DANS LE TOOLKIT ?	7
MISE À DISPOSITION DES RAPPORTS	7
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	8
INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ENQUETE	11
INFORMATIONS REPRISES DANS LE TOOLKIT	11
NATURE DES ÉCHANTILLONS	11
RÉSULTATS BRUTS	11
25-OH VITAMINE D	13
A-FOETOPROTÉINE (AFP).....	14
ANTI-TPO	15
CA 15.3.....	16
CA 19.9.....	17
CA 125.....	19
CEA	20
CORTISOL	21
DÉHYDROÉPIANDROSTÉRONE - SULFATE (DHEA-S).....	23
FERRITINE.....	24
ACIDE FOLIQUE.....	25
T3 LIBRE (FT3)	27
T4 LIBRE (FT4)	28
HORMONE FOLLICULO-STIMULANTE (FSH).....	29
HORMONE DE CROISSANCE	30
HORMONE CHORIONIQUE GONADOTROPE HUMAINE (HCG)	31
INSULINE	32
HORMONE LUTEINISANTE (LH).....	33
OESTRADIOL.....	34
PROGESTERONE	35
PROLACTINE.....	36
ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA).....	37
TESTOSTERON.....	38

THYROGLOBULINE	39
THYREOSTIMULINE (TSH).....	40
VITAMINE B12	41

TABLE DE CONVERSION – IMMUNOESSAIS

25-OH VIT D	ng/mL	x 1.0000	⇒	
	µg/L	x 1.0000	⇒	ng/mL
	nmol/L	x 0.4006	⇒	
AFP	µg/L	x 1.0000	⇒	
	µg/dL	x 10.000	⇒	
	ng/mL	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/dL	x 0.0100	⇒	
	U/mL	x 1.2100	⇒	
CA 15.3 - CA 19.9	kU/L	x 1.0000	⇒	kU/L
CA 125	U/mL	x 1.0000	⇒	
CEA	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
CORTISOL	nmol/L	x 1.0000	⇒	
	µg/dL	x 27.600	⇒	nmol/L
	ng/mL	x 2.7600	⇒	
C-PEPTIDE	nmol/L	x 1.0000	⇒	
	pmol/mL	x 1.0000	⇒	nmol/L
	ng/mL	x 0.33205	⇒	
	µg/L	x 0.33205	⇒	
DHEA-S	µmol/L	x 1.0000	⇒	
	nmol/L	x 0.0010	⇒	
	ng/mL	x 0.00271	⇒	µmol/L
	µg/mL	x 2.7140	⇒	
	mg/L	x 2.7140	⇒	
	µg/dL	x 0.02714	⇒	
FERRITINE	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
FOLATE	µg/L	x 1.0000	⇒	
	ng/mL	x 1.0000	⇒	µg/L
	nmol/L	x 0.4415	⇒	
FREE T3	pmol/L	x 1.0000	⇒	
	pg/dL	x 0.0154	⇒	pmol/L
	pg/mL	x 1.5400	⇒	
	ng/L	x 1.5400	⇒	
FREE T4	pmol/L	x 1.0000	⇒	
	ng/dL	x 12.900	⇒	
	ng/L	x 1.2900	⇒	pmol/L
	ng/mL	x 1290.0	⇒	
	pg/mL	x 1.2900	⇒	
FSH	U/L	x 1.0000	⇒	U/L
	mU/mL	x 1.0000	⇒	
hGH	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	mU/L	x 0.33	⇒	

hCG	U/L	x 1.0000	⇒	U/L
	mU/mL	x 1.0000	⇒	
INSULIN	pmol/L	x 1.0000	⇒	
	µU/mL	x †	⇒	pmol/L
	mU/L	x †	⇒	
LH	U/L	x 1.0000	⇒	U/L
	mU/mL	x 1.0000	⇒	
NSE	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
OESTRADIOL	ng/L	x 1.0000	⇒	
	pg/mL	x 1.0000	⇒	
	pmol/L	x 0.2725	⇒	ng/L
	ng/mL	x 1000.0	⇒	
	ng/dL	x 10.000	⇒	
	nmol/L	x 0.0003	⇒	
PARATHORMONE	ng/L	x 1.0000	⇒	ng/L
	pg/mL	x 1.0000	⇒	
PROGESTERONE	x			
	µg/L	x 1.0000	⇒	
	ng/mL	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/dL	x 0.0100	⇒	
	nmol/L	x 0.3145	⇒	
PROLACTIN	µg/L	x 1.0000	⇒	
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
	mg/L	x 1000.0	⇒	µg/L
	mU/mL	x 47.000	⇒	
	mU/L	x 0.0470	⇒	
PSA	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
TESTOSTERONE	nmol/L	x 1.0000	⇒	
	pg/mL	x 0.00347	⇒	nmol/L
	ng/dL	x 0.03470	⇒	
	ng/mL	x 3.4700	⇒	
THYROGLOBULIN	µg/L	x 1.0000	⇒	µg/L
	ng/mL	x 1.0000	⇒	
TSH	mU/L	x 1.0000	⇒	mU/L
	µU/mL	x 1.0000	⇒	
VIT B 12	ng/L	x 1.0000	⇒	
	pg/mL	x 1.0000	⇒	ng/L
	pmol/L	x 1.3550	⇒	

† depending on the kit used

INTRODUCTION

Homogénéité des échantillons

L'échantillon a été certifié homogène par la firme Randox.

Stabilité des échantillons

L'échantillon a été certifié stable par la firme Randox.

La valeur cible

La valeur cible est la médiane de la méthode si le nombre de résultats pour cette méthode est supérieur ou égal à 6. Si le nombre de résultats est inférieur à 6, les laboratoires ne sont pas évalués. Si le nombre de valeurs censurées est trop élevé le Z score n'est pas non plus calculé.

Mise à jour des trousse

Afin de garantir la validité des résultats du contrôle externe, il est important que toutes les informations relatives à la méthode et la trousse utilisées soient correctes. Nous constatons, à chaque enquête, qu'un petit nombre de laboratoires oublie de contrôler la validité de ces informations. Si vous n'avez pas trouvé votre méthode ou trousse dans le toolkit, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible, en nous envoyant un e-mail avec en pièce jointe un scan de la notice de votre trousse à l'adresse suivante: audrey.vantorre@sciensano.be.

Trousses périmées

Lorsque la dernière trousse fabriquée arrive à péremption, sa référence disparaît du toolkit. Un message d'alerte apparaît à l'écran : « Votre kit est périmé. Pourriez-vous introduire votre nouveau numéro de catalogue ? ». Il est alors impératif que vous reparamétriez votre nouvelle trousse et ce, **même s'il ne s'agit que d'un changement de numéro de catalogue**.

Pour toutes les méthodes « kit dépendantes », le principe de la méthode est attribué automatiquement.

Comment encoder des Résultats censurés (< ou > que la valeur seuil) dans le toolkit ?

Exemple d'encodage:

The screenshot shows a software interface for HCG (Human Chorionic Gonadotropin) testing. At the top, a green header bar contains the text 'HCG'. Below this, a grey box contains the following information: 'Kit: ROCHE Diagnostics (BMkits) Elecsys - hCG + β (03271749190)', 'Méthode: ECLIA', and 'Appareil de mesure: ROCHE Cobas 6000 (e 601)'. Below this information is a section titled 'Définition paramètres pour HCG'. Under this title, there is a label 'Résultat (Opérateur+Valeur+Unité)' followed by a dropdown menu showing '<' and a text input field. To the right of the input field is a dropdown menu showing 'U/L'. Below the input field is a label 'Texte libre' followed by a text input field. A mouse cursor is pointing at the '<' option in the dropdown menu.

Les signes « > » et « < » se trouvent juste **devant** la case où le **résultat quantitatif** est encodé.

Mise à disposition des rapports

Nous vous demandons d'envoyer vos réponses le plus rapidement possible, ceci afin de nous permettre de libérer une première version non validée du rapport individuel dans les jours qui suivent la date effective de clôture de l'encodage des données. Pour les laboratoires ayant un problème ponctuel relatif à ces encodages, il est possible de prolonger l'accès au toolkit. Toutefois ceci retarde la production des rapports pour l'ensemble du groupe. Nous vous demandons donc d'être attentifs et de respecter les délais proposés dans l'intérêt de tous. Une fois les rapports individuels non validés accessibles, vous disposez de 7 jours afin de nous faire part de vos remarques éventuelles. Nous encourageons les laboratoires à relire attentivement leurs résultats après encodage, (cfr. les analyses non automatisés en routine) en vue de minimiser toute erreur (unité, encodage, autre...). Si malgré tout vous remarquez une erreur d'encodage de votre part, sur votre rapport individuel non validé, veuillez nous le signaler.

Après validation de l'enquête par le Comité d'experts, le rapport global définitif est mis à disposition sur notre site web à l'adresse suivante:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-immunoessais>

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale (M_G):
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global (SD_G):
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode (M_M):
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode (SD_M):
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ et $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- Le score Z:
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type):
 $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ et $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Votre résultat est cité si $|Z_M| > 3$.
- Le score U:
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la médiane de votre méthode (exprimé en %): $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ et $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Votre résultat est cité si $|U_M| > d$, où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

R : votre résultat

$M_{M/G}$: médiane

$H_{M/G}$: percentiles 25 et 75

$I_{M/G}$: limites intérieures ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: limites extérieures ($M \pm 4.7 SD$)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ($M_{M/G}$).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:


<https://www.sciensano.be/fr/evaluation-externe-de-la-qualite/sante-clinique-eeq-biologie-clinique>

- [Brochure d'information générale EEQ](#)
- [Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ](#)
- [Traitement des valeurs censurées](#)

Représentation graphique

A côté des tableaux de résultats, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée. Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.

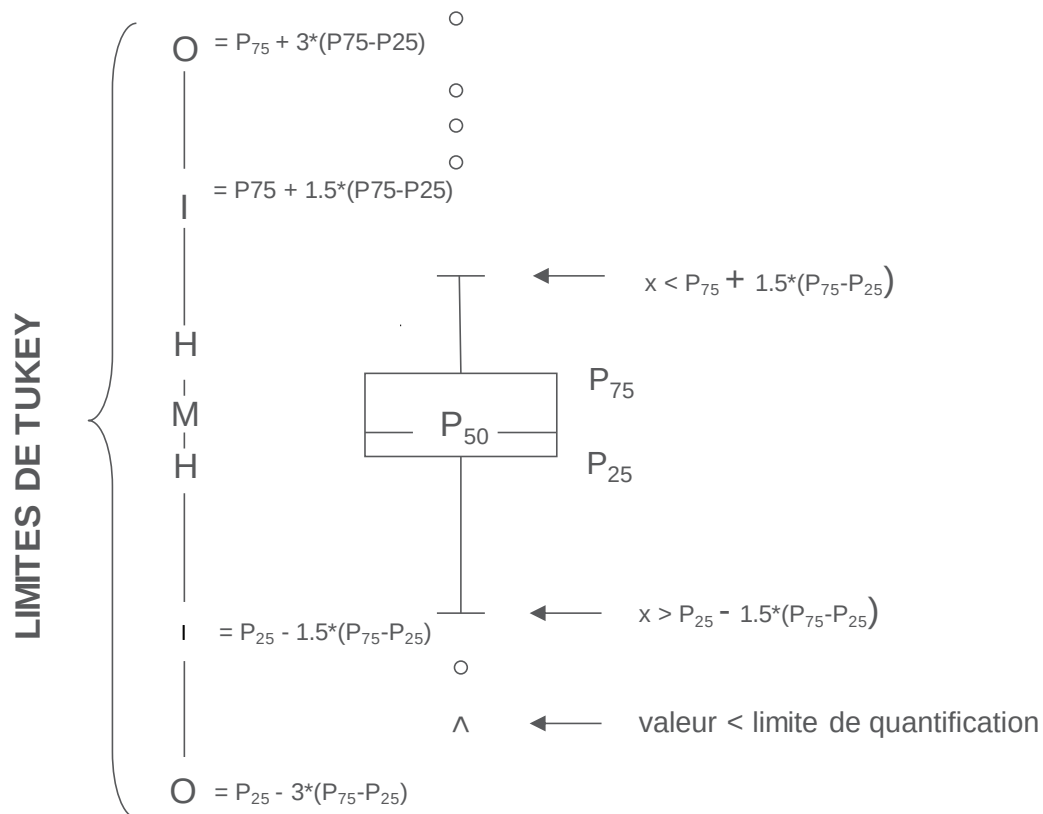

Limites correspondantes en cas de distribution normale

INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ENQUETE

L'échantillon de l'enquête 2026/1 a été envoyé le 02/02/2026. L'encodage des résultats a été clôturé le 16/02/2026. Le 26/02/2026, les rapports individuels non validés étaient accessibles dans le toolkit. La validation a été réalisée le 29/05/2026. Depuis cette date, les rapports individuels définitifs sont disponibles via le toolkit. Ce rapport a été publié sur notre site web le 29/05/2026.

Informations reprises dans le toolkit

Veillez effectuer les analyses le plus rapidement possible après réception de l'échantillon ou au plus tard le 06/02/2026. Conservez l'échantillon entre 2 et 8°C.

R/22041 : Veuillez traiter ce produit de la même manière que les échantillons de patients.

Laissez le produit revenir à température ambiante (15 à 25 °C) avant de procéder à l'analyse. Agiter doucement le flacon pour assurer l'homogénéité du produit. Évitez la formation de mousse. Après chaque utilisation, replacer rapidement le bouchon.

Cet échantillon est également destiné aux EEQ Monitoring thérapeutique et Marqueurs Cardiaques 2026/1.

Nature des échantillons

A l'occasion de cette enquête 2026/1, un échantillon liquide congelé (4mL) de la firme Randox a été envoyés à tous les participants : Notamment l'échantillon **R/22041**.

Résultats bruts

Les résultats bruts anonymisés peuvent être obtenus sur demande à audrey.vantorre@sciensano.be.

Avant-Propos

Lorsque la variabilité analytique d'une méthode donnée pour un paramètre donné comparée à l'historique de notre base de données est basse, un recalcul des statistiques de base est réalisé après exclusion des outliers si présents dans le groupe de pairs concerné afin de voir si oui ou non des résultats cités abusivement pour l'évaluation Z peuvent être récupérés. C'est une démarche supplémentaire pour évaluer au mieux les laboratoires. Il appartient en outre au laboratoire lui-même de faire une analyse critique de ses propres citations. L'analyse post hoc de la stabilité des échantillons sur base des résultats obtenus par les participants peut mener à la non-évaluation d'un paramètre lorsque jugé nécessaire.

Suite aux résultats de l'étude de **stabilité et de basse variabilité**, **certaines modifications ont été apportées aux rapports de l'EEQ Immunoessais 2026/1.**

Veuillez **lire attentivement ces changements** et vérifier s'ils ont eu un impact sur votre rapport individuel.

Étude de stabilité:

Sur base des résultats des participants, Sciensano effectue une post-analyse afin de vérifier l'homogénéité et la stabilité des échantillons. Si l'analyse de stabilité révèle qu'un paramètre ne satisfait pas aux exigences, notamment en raison d'une augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse, celui-ci peut ne pas être évalué. Les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous ne répondent pas aux exigences de stabilité et **ne sont donc pas évalués** :

Si vous avez rapporté certains de ces paramètres, ceux-ci ne sont donc plus évalués:

Échantillon	Paramètre	Valeur P pour les scores Z (corrélation de Spearman)	Valeur P pour les scores U (corrélation de Spearman)
R/22041	Oestradiol	0.0054	0.0028
R/22041	Prolactine	0.0068	0.0112


Étude de basse variabilité:

Suite aux résultats de l'étude de basse variabilité, l'écart type robuste, habituellement utilisé pour les calculs d'EEQ, est conservé pour tous les paramètres et pour tous les groupes de pairs.

25-OH VITAMINE D

25-OH VITAMINE D - d (%) : 24.0	R/22041			
METHODE	Median ng/mL	SD ng/mL	CV %	N
020 LC-MS/MS	32.0	36.5		2
111 DiaSorin - Liaison 25-OH Vit D Total	28.3	2.4	8.4	12
130 Beckman Coulter - Access 25(OH) Vit D Total	30.0	32.4	36.7	3
141 Abbott - ARCHITECT 25-OH Vit D (5P02)	29.0	30.8		2
143 Abbott - Alinity	31.2	1.7	5.5	19
167 Siemens - Atellica	21.7	1.8	8.2	22
180 Roche - Vit D total - Gen.1	36.0	2.5	7.0	48
181 Roche - Vit D total - Gen.2	34.8	38.0		2
182 Roche - Vit D total - Gen.3	30.6	33.3	34.8	3
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	35.2	38.5		2
190 OCD - Vitros 25-OH Vit D total	50.8	4.7	9.2	8
200 Fujirebio - Lumipulse G 25-OH Vitamin D	31.4			1
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	33.4	5.7	17.0	124

Les résultats de la méthode 190 OCD - Vitros 25-OH Vit D total montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice.

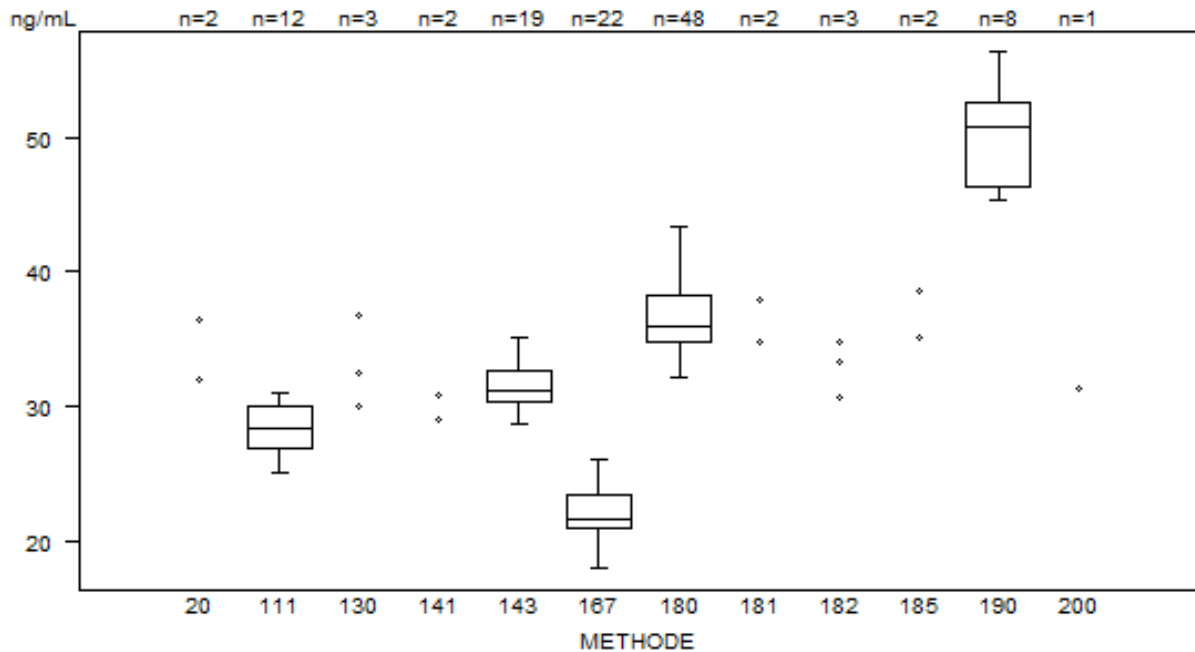

Données hors graphe
Méthode Résultat
190 = 63.5 ng/mL


Nombre de citations pour la 25-OH Vitamine D: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
190 OCD - Vitros 25-OH Vit D total	0	1

* d25-OH VIT D: 24% / ± 4.0 ng/mL

α-Foetoprotéine (AFP)

AFP - d (%) : 15.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
033 BioMérieux Vidas	212.7	24.2	11.4	6
035 Siemens Immulite	213.0	13.3	6.3	7
037 DiaSorin Liaison	144.0			1
038 Brahms Kryptor	245.6			1
040 Beckman Coulter Access	186.9 253.0	204.8 257.0	206.0	5
048 Abbott Alinity	211.0	8.5	4.0	16
082 OCD Vitros	239.0	242.0	255.0	3
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	213.7 236.0	227.0 243.1	228.8	5
167 Siemens - Atellica	271.5	16.9	6.2	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801	225.0	10.4	4.6	33
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	224.0	17.8	7.9	91

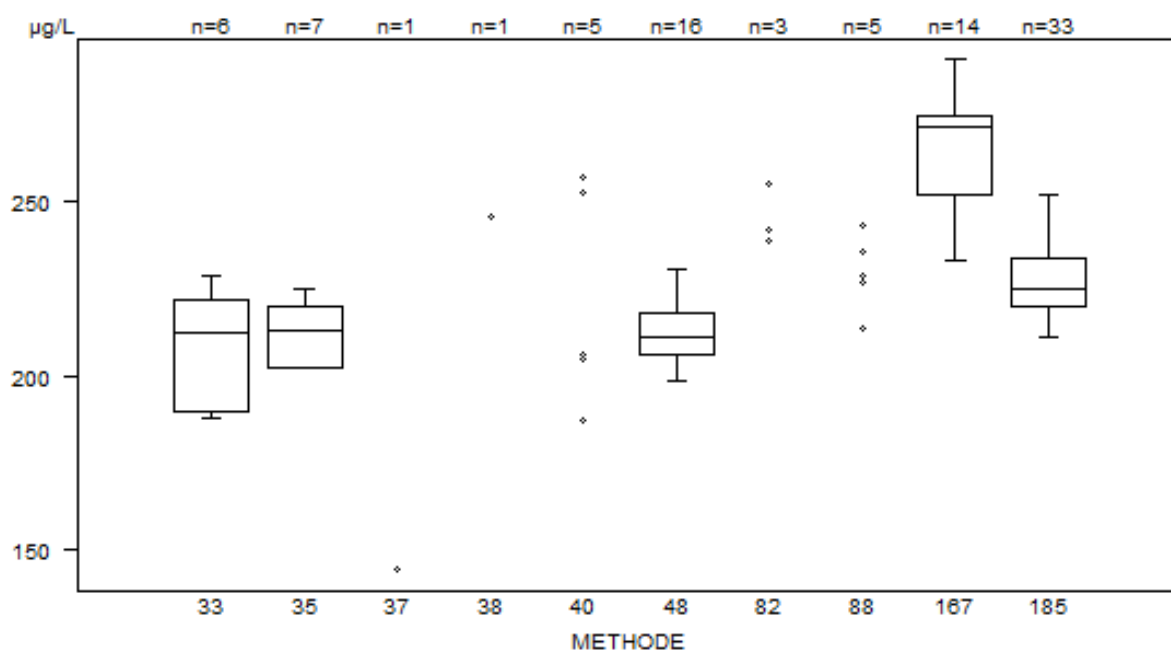

Données hors graphe

Méthode Résultat
035 < 0.2 µg/L


Nombre de citations pour l'AFP: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
035 Siemens Immulite	1	1

* dAFP: 15% / ± 2.3µg/L

ANTI-TPO

ANTI-TPO - d (%) : Pas encore défini	R/22041			
METHODE	Median IU/mL	SD IU/mL	CV %	N
011 Abbott - Alinity	119.00	4.27	3.6	19
012 Abbott - Architect	73.70	126.80		2
020 Beckman - Coulter Access	67.00 79.00	68.08 83.40	77.00	5
025 DiaSorin - Liaison	126.00			1
030 Siemens - Immulite	74.00	98.20	106.00	3
035 Phadia	75.00	8.90	11.9	7
040 Roche - Elecsys/ Mod E / Cobas e	86.86	8.23	9.5	6
045 Diesse Diagnostica	154.10			1
167 Siemens - Atellica	116.50	3.71	3.2	18
185 Roche - Elecsys cobas e 801	99.50	6.97	7.0	34
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	106.00	17.23	16.3	96

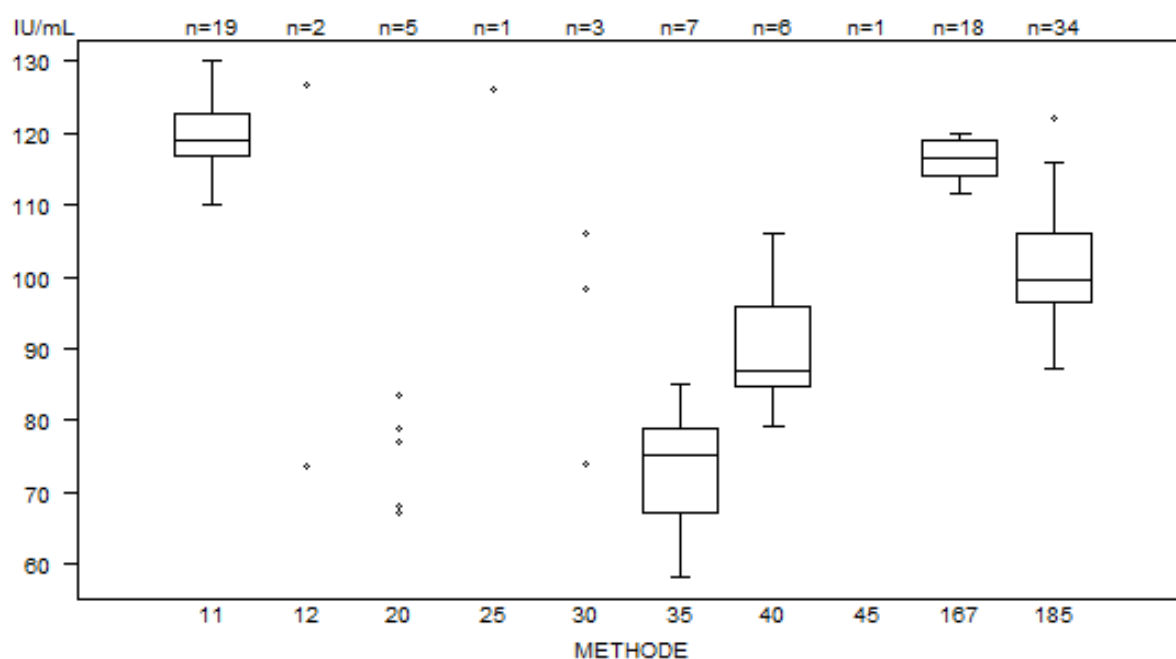

Données hors graphe


Méthode Résultat
045 = 154.1 IU/mL

Nombre de citations pour l'Anti-TPO: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1

CA 15.3

CA 15.3 - d (%) : 15.0	R/22041			
METHODE	Median kU/L	SD kU/L	CV %	N
027 Abbott Architect	83.6 118.8	103.7	108.0	4
028 Abbott Alinity	109.1	4.3	3.9	20
033 BioMérieux Vidas	43.0			1
036 Beckman Coulter Access	44.4	45.0	47.7	3
042 DiaSorin Liaison	105.0			1
070 Roche Elecsys/Mod E/ Cobas e	94.4	8.4	8.9	10
082 Vitros ECI	88.5	4.4	5.0	6
167 Siemens - Atellica	100.2	7.9	7.9	18
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	95.3	3.6	3.7	38
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	96.9	9.7	10.0	101

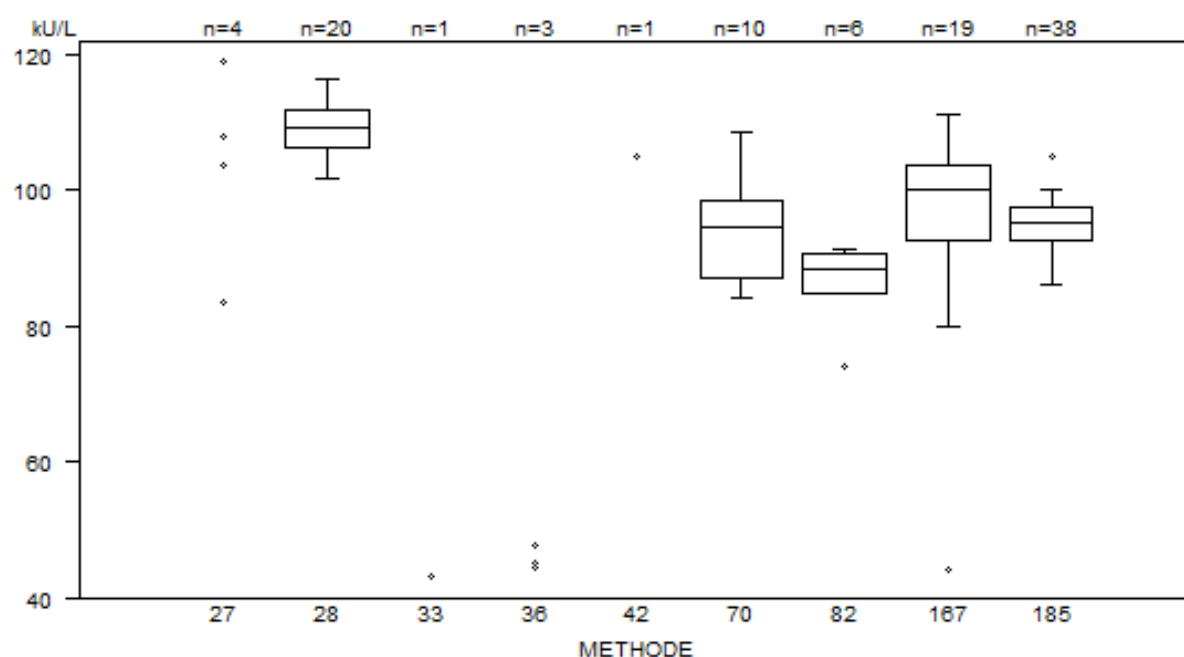

Données hors graphe

Méthode Résultat

028 = 124.6 kU/L

Nombre de laboratoires cités pour le CA 15.3: Échantillon R/22041


Méthode	Citation Z
028 Abbott Alinity	1
082 Vitros ECI	1

* dCA 15.3: 15%

CA 19.9

CA 19.9 - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median kU/L	SD kU/L	CV %	N
027 Abbott Architect	130.0	264.6	285.8	3
029 Abbott Alinity	280.0	12.7	4.5	17
033 BioMérieux Vidas	123.6	25.3	20.5	7
036 Beckman Coulter Access	350.5	376.0	419.0	3
042 DiaSorin Liaison	183.0			1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	131.0	3.3	2.5	13
082 OCD Vitros	199.0 216.0	211.0	213.0	4
167 Siemens - Atellica	192.1	10.4	5.4	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801	129.0	3.7	2.9	34
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	135.0	61.7	45.7	96

Les résultats de la méthode 029 Abbott Alinity montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice.

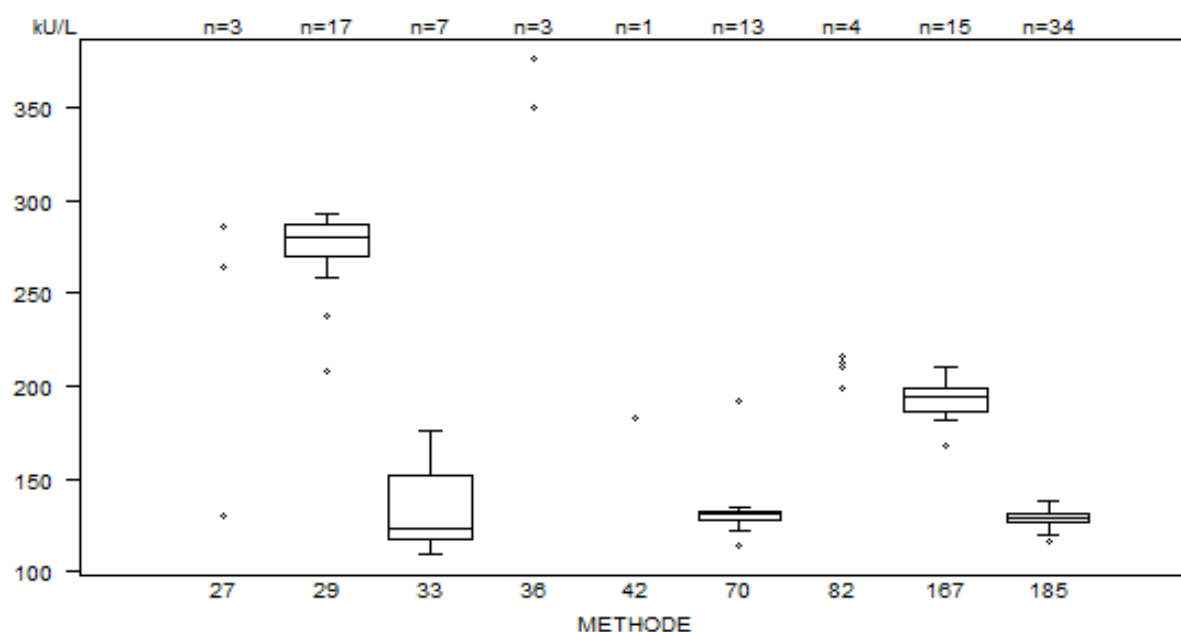

Données hors graphe

Méthode	Résultat
033	= 455 kU/L
036	= 419 kU/L
167	= 440 kU/L


Nombre de laboratoires cités pour le CA 19.9: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
029 Abbott Alinity	2
033 BioMérieux Vidas	1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	2
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1

* dCA 19.9: 21%

CA 125

CA 125 - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median kU/L	SD kU/L	CV %	N
027 Abbott Architect	127.0 202.4	197.5	198.5	4
029 Abbott Alinity	200.8	7.9	3.9	16
033 BioMérieux Vidas	142.0	15.1	10.6	7
036 Beckman Coulter Access	125.0	126.1	143.2	3
042 DiaSorin Liaison	187.0			1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	136.8	7.5	5.5	13
082 OCD Vitros	150.0	150.0	151.0	3
167 Siemens - Atellica - Gen.2	176.1	5.2	2.9	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	133.0	5.2	3.9	35
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	141.0	35.4	25.1	96

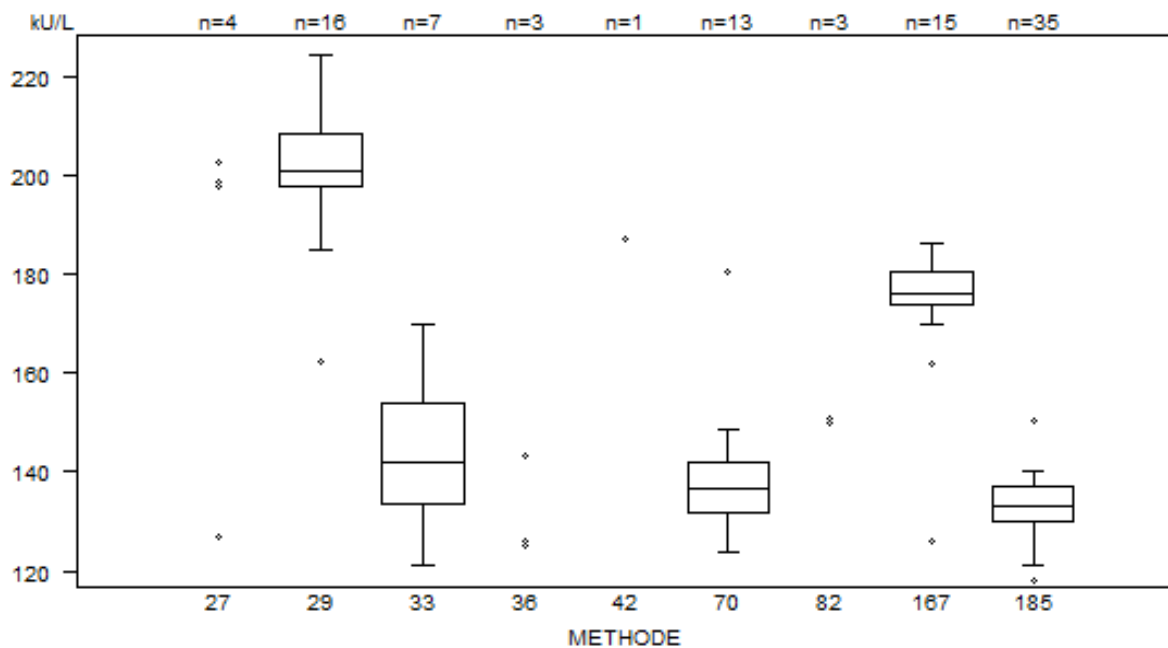


Nombre de laboratoires cités pour le CA 125: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
029 Abbott Alinity	1
070 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e	1
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	1

* dCA 125: 16% /± 6.03 kU/L

CEA

CEA - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
036 Beckman Coulter Access	50.1	3.4	6.8	6
043 DiaSorin Liaison	53.0			1
082 OCD Vitros	57.8	2.4	4.2	6
088 Roche Elecsys/ Mod E / Cobas e	43.6	1.9	4.3	6
090 Abbott Alinity	59.6	3.0	5.0	23
167 Siemens - Atellica	52.4	2.2	4.3	22
185 Roche - Elecsys cobas e 801	44.5	1.1	2.6	48
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	48.1	8.2	16.9	112

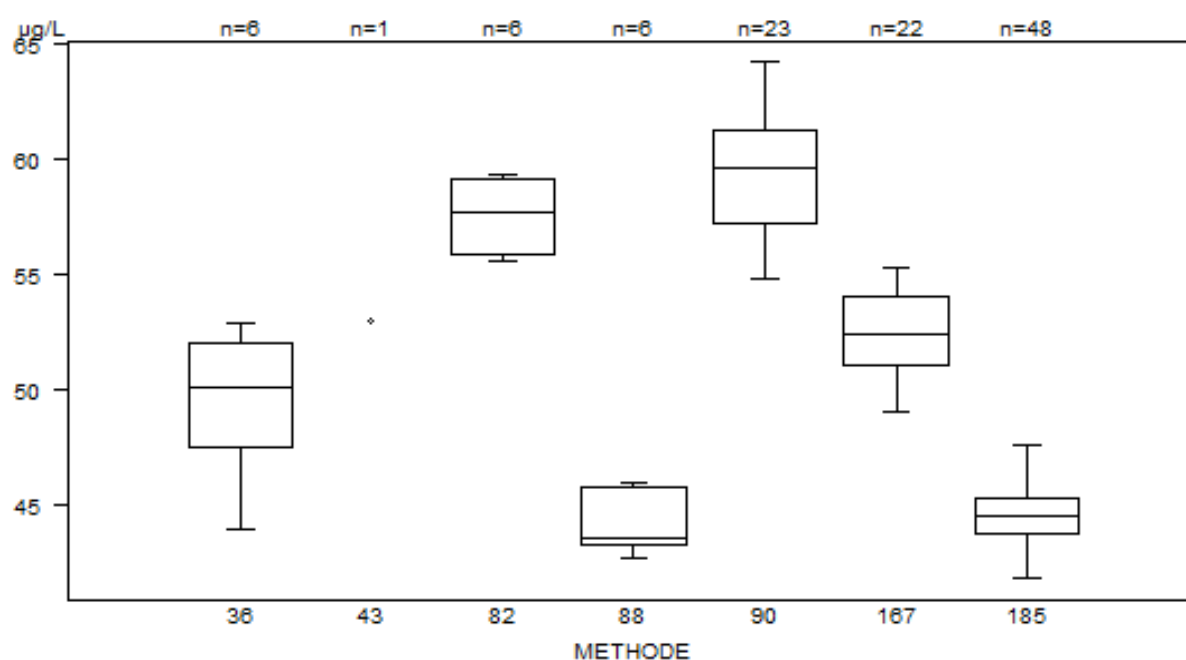

Données hors graphe

Méthode Résultat
185 = 40 µg/L


Nombre de citations pour le CEA: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
036 Beckman Coulter Access	0	1
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1	0

* dCEA: 12.0 %/ ± 1 µg/L

CORTISOL

CORTISOL - d (%) : 19.0		R/22041			
METHODE		Median nmol/L	SD nmol/L	CV %	N
020 LC-MS/MS		943			1
035 Abbott Architect		731			1
036 Abbott Alinity		751	26	3.5	22
038 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (1st gen.)		889			1
039 Roche Mod E/ Cobas e (2nd gen.)		919 985	935	942	4
042 DiaSorin Liaison		662			1
047 BioMérieux Vidas		689	803		2
081 Beckman Coulter Access		654 789	678 801	759	5
082 OCD Vitros		642	11	1.6	6
167 Siemens - Atellica		794	63	7.9	18
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2		900	28	3.2	50
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)		858	110	12.8	111

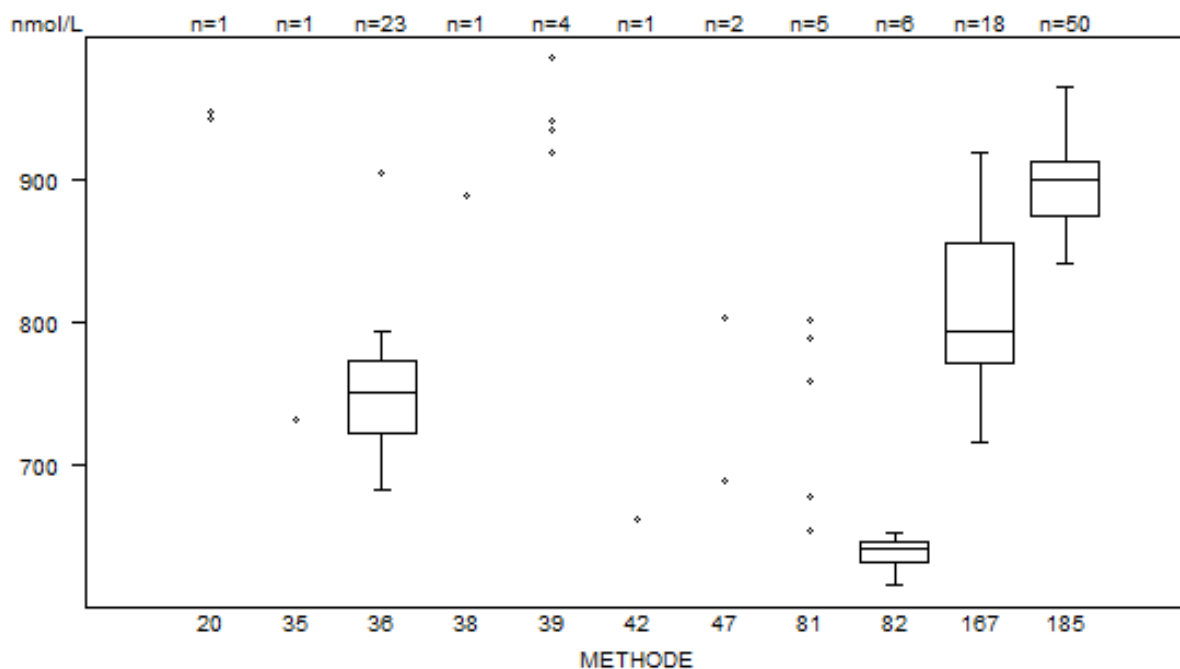

Données hors graphe

Méthode Résultat

036 = 26 nmol/L

185 = 328 nmol/L

185 = 34 nmol/L


Nombre de citations pour le Cortisol: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
036 Abbott Alinity	2	2
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	2

* dCortisol: 19% / $\pm$ 32.5 nmol/L

DÉHYDROÉPIANDROSTÉRONÉ - SULFATE (DHEA-S)

Déhydroépiandrostérone - Sulfate - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median μmol/L	SD μmol/L	CV %	N
018 LC-MS	18.32	22.25		2
020 Abbott Architect	21.06	21.85		2
022 Abbott Alinity	20.20	0.98	4.8	19
030 Beckman Coulter Access	19.38 21.85	20.05 21.86	20.22	5
050 Diasorin Liaison	14.97	18.90		2
070 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	20.50	22.68	22.77	3
085 Siemens Immulite	17.91 22.50	18.32	20.44	4
167 Siemens - Atellica	17.44	0.97	5.6	12
185 Roche - Elecsys cobas e 801	22.30	0.85	3.8	37
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	21.25	2.17	10.2	86

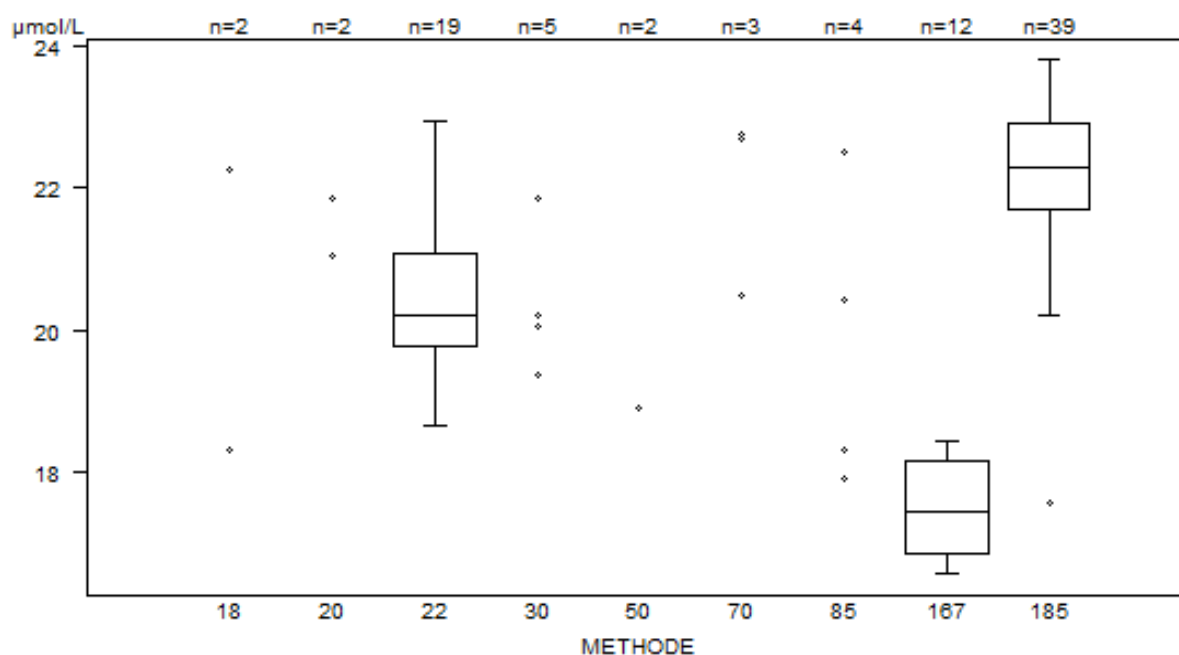

Données hors graphe

Méthode Résultat
050 = 14.97 μmol/L
185 = 894 μmol/L
185 = 24.91 μmol/L
185 = 25.4 μmol/L


Nombre de citations pour la DHEA-S: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
185 Roche - Elecsys cobas e 801	3	1

* dDHEA-S: 21%/ ± 0.4 μmol/L

FERRITINE

FERRITINE - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	230	9	4.1	6
082 OCD Vitros	216	7	3.1	9
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	357 405	357 437	359	5
089 Abbott Architect	409			1
093 Abbott Alinity	419	28	6.7	27
098 Roche - Cobas c311/501/502 (4th gen.)	333			1
100 Roche - Cobas c701/702 (4th gen.)	343	10	2.8	22
101 Roche / Hitachi cobas c 503	327	17	5.2	20
167 Siemens - Atellica	279	11	3.9	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801	365	13	3.7	25
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	342	66	19.4	140

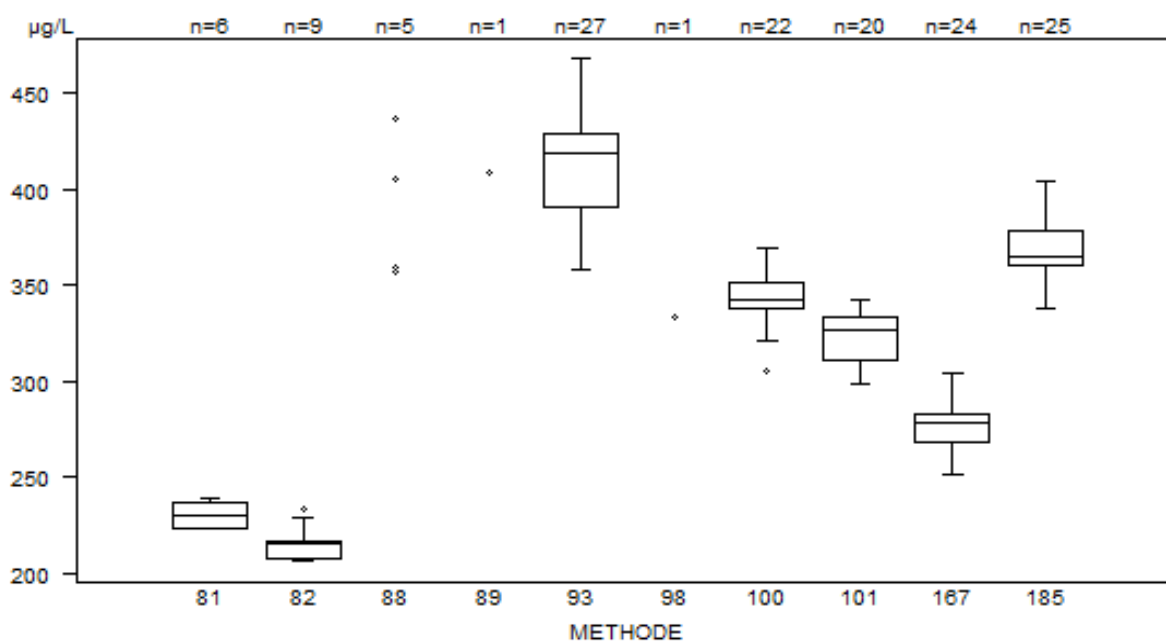

Données hors graphe
Méthode Résultat
101 = 112 µg/L

Nombre de citations pour la Ferritine: Échantillon R/22041


Methode	Citation Z	Citation U
100 Roche - Cobas c701/702 (4th gen.)	1	0
101 Roche / Hitachi cobas c 503	1	1

* dFerritine: 16%

ACIDE FOLIQUE

ACIDE FOLIQUE - d (%) : 28.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	14.2	0.6	4.2	6
082 OCD Vitros	6.8	0.4	6.0	6
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	12.7	1.4	10.7	7
090 Abbott Architect is 03/178	11.0 13.1			2
091 Abbott Alinity	11.8	1.3	11.3	26
167 Siemens - Atellica	19.8	8.1	40.7*	21
185 Roche - Elecsys cobas e 801	13.3	1.0	7.2	61
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	13.3	1.7	12.8	129

Les résultats de la méthode 082 OCD Vitros montrent un biais négatif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice.



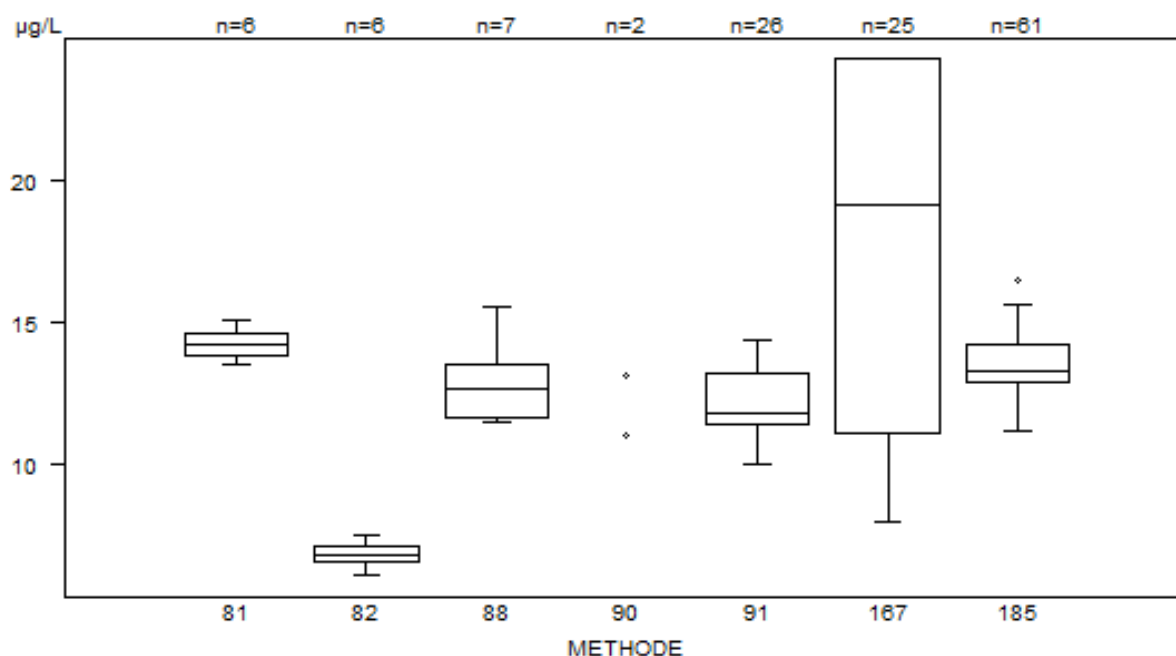


Nombre de citations pour l'Acide Folique: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
167 Siemens - Atellica	0	7
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1	0

* dAcide Folique: 28% / ± 1.2 µg/L

* Pour la détermination de l'acide folique, un CV élevé (40,7 %) et une suspicion de bimodalité ont été constatés pour les résultats obtenus avec la méthode 167 Siemens - Atellica. Pour analyser plus en détail cette distribution, une étude statistique a été effectuée, dont les résultats sont illustrés à la page suivante :

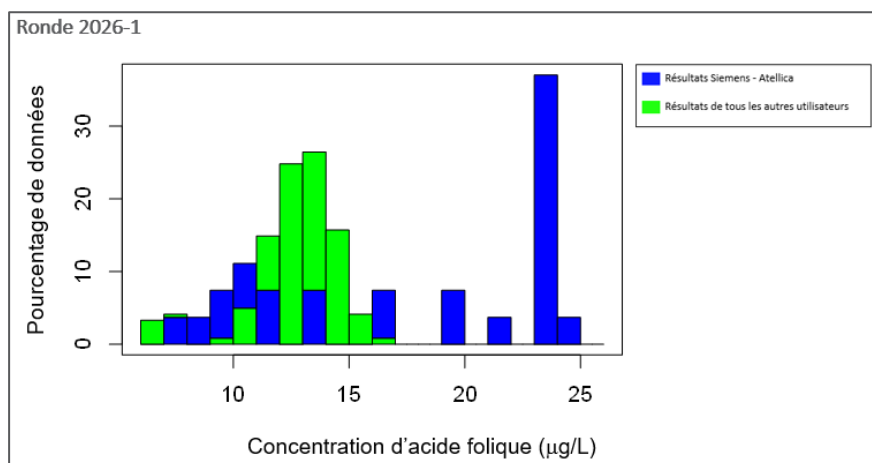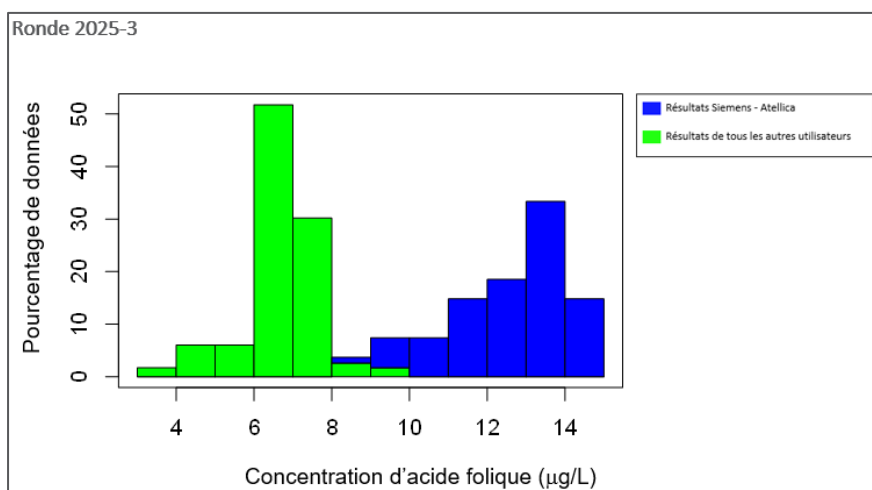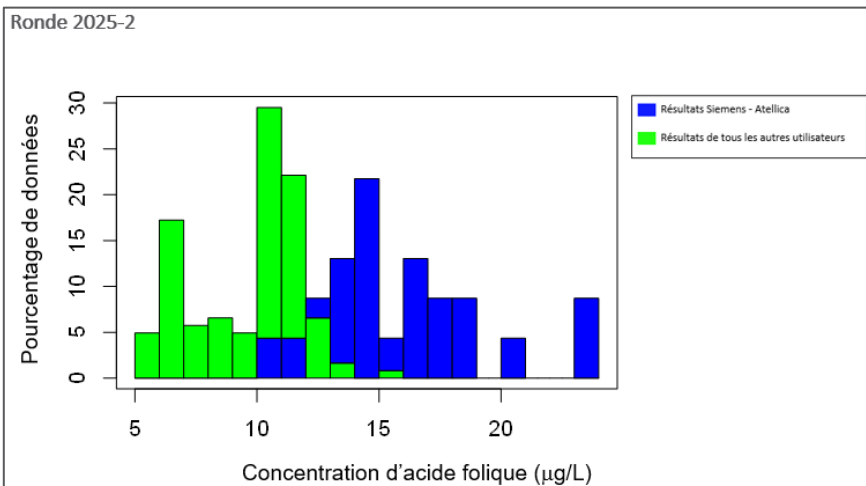


Au cours des trois dernières enquêtes, on observe un biais positif parmi les résultats des utilisateurs de 167 Siemens - Atellica (en bleu) par rapport aux autres participants (en vert). Lors de l'enquête 2026-1, une partie de ce groupe de référence rapporte des résultats similaires à ceux des autres participants, tandis qu'une autre partie conserve ce biais positif. Cela explique la bimodalité. Le pic autour de 24 µg/L correspond aux laboratoires ayant saisi un résultat « > 24 ».

Compte tenu de la nature commerciale des échantillons de contrôle utilisés, leur commutabilité est incertaine. Les échantillons commerciaux peuvent notamment provoquer des effets de matrice qui expliquent le biais positif par rapport aux autres participants. Bien que des échantillons commerciaux similaires provenant du même fabricant (Randox) aient été utilisés dans des enquêtes précédentes, nous recommandons de vérifier si cette observation est également observable en routine. Nous recommandons également de vérifier si, entre l'enquête précédente 2025/3 et cette enquête 2026/1, des modifications ont été apportées en matière de calibration, de numéros de lot, de références de kits ou de protocoles, susceptibles d'expliquer la bimodalité observée.

T3 LIBRE (FT3)

T3 Libre - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median pmol/L	SD pmol/L	CV %	N
029 BioMérieux Vidas	17.5			1
032 Beckman Coulter Access	13.8	15.8	17.8	5
	18.2	18.5		
082 OCD Vitros	31.4	0.9	2.9	8
087 Roche Elecsys/Mod E/cobas e (3rd gen)	25.7	0.7	2.9	60
089 Abbott Architect	19.7 20.5			2
094 Abbott Alinity	20.4	1.6	8.1	24
167 Siemens - Atellica	18.5	0.5	2.7	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	24.4	25.0	25.4	5
	25.4	26.5		
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	25.0	4.9	19.7	129

Les résultats de la méthode 082 OCD Vitros montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice.

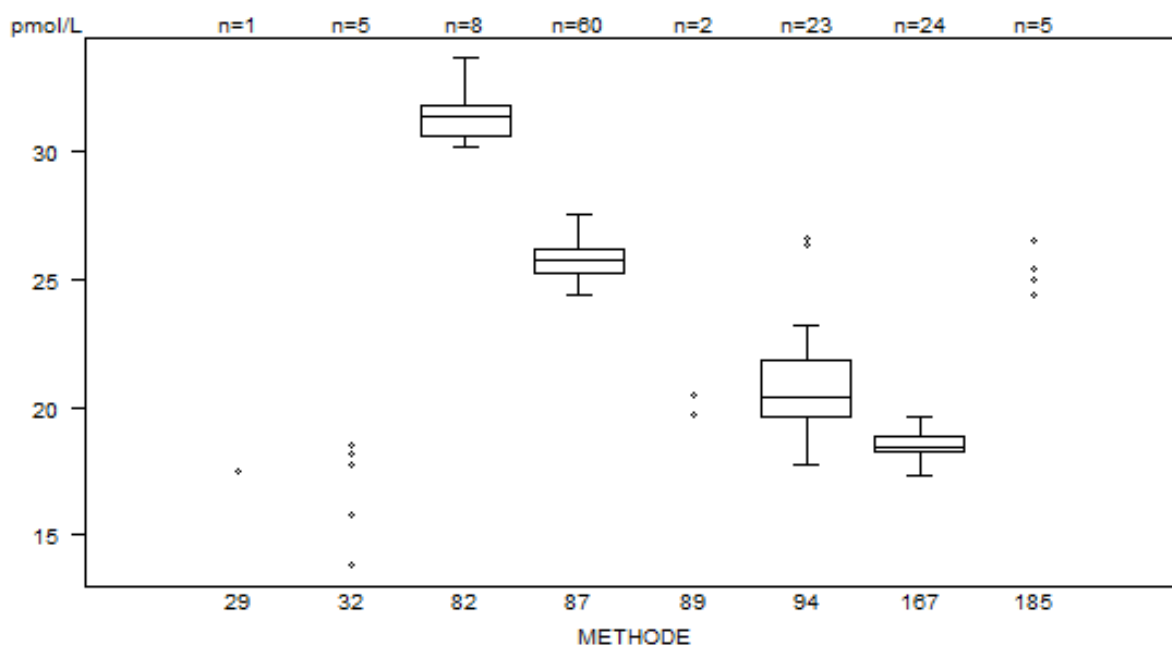

Nombre de citations pour la T3 Libre: Échantillon R/22041


Méthode	Citation Z	Citation U
094 Abbott Alinity	2	4
167 Siemens - Atellica	0	0

* dFT3: 12% / ± 0.9 pmol/L

T4 LIBRE (FT4)

T4 Libre - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median pmol/L	SD pmol/L	CV %	N
042 Beckman Coulter Access (33880)	24.0 25.0	24.5 27.0	24.8	5
050 Home made	26.6			1
082 OCD Vitros	53.0	2.3	4.4	9
086 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e (3rd gen)	36.2	36.5		2
087 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e (2nd gen)	37.8	38.6		2
089 Abbott Architect	24.3			1
090 Abbott Alinity	26.0	1.4	5.3	27
167 Siemens - Atellica	33.6	1.2	3.7	26
186 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	38.4	0.9	2.2	7
187 Roche - Elecsys/Mod E/cobas e - Gen. 4	37.5	1.7	4.6	58
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	35.9	6.1	17.0	138

Les résultats de la méthode 082 OCD Vitros montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice

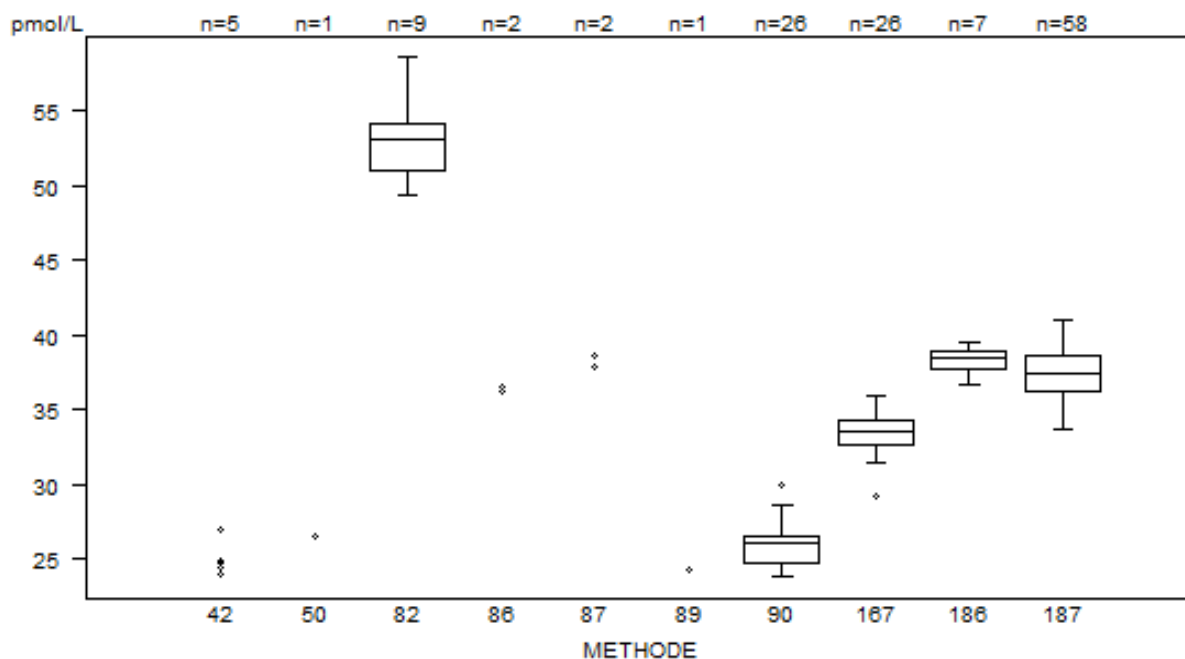

Nombre de citations pour la T4 libre: Échantillon R/22041


Méthode	Citation Z	Citation U
090 Abbott Alinity	0	1
167 Siemens - Atellica	1	1

* dFT4: 12%

HORMONE FOLLICULO-STIMULANTE (FSH)

FSH - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	57.4	4.5	7.9	6
082 OCD Vitros	41.5	0.5	1.3	9
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	50.6	1.7	3.4	57
090 Abbott Alinity	51.7	2.4	4.6	25
167 Siemens - Atellica	49.9	3.2	6.5	25
185 Roche - Elecsys cobas e 801	50.1	1.5	3.0	8
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	50.5	2.5	5.0	130

Les résultats de la méthode 082 OCD Vitros montrent un biais négatif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice.

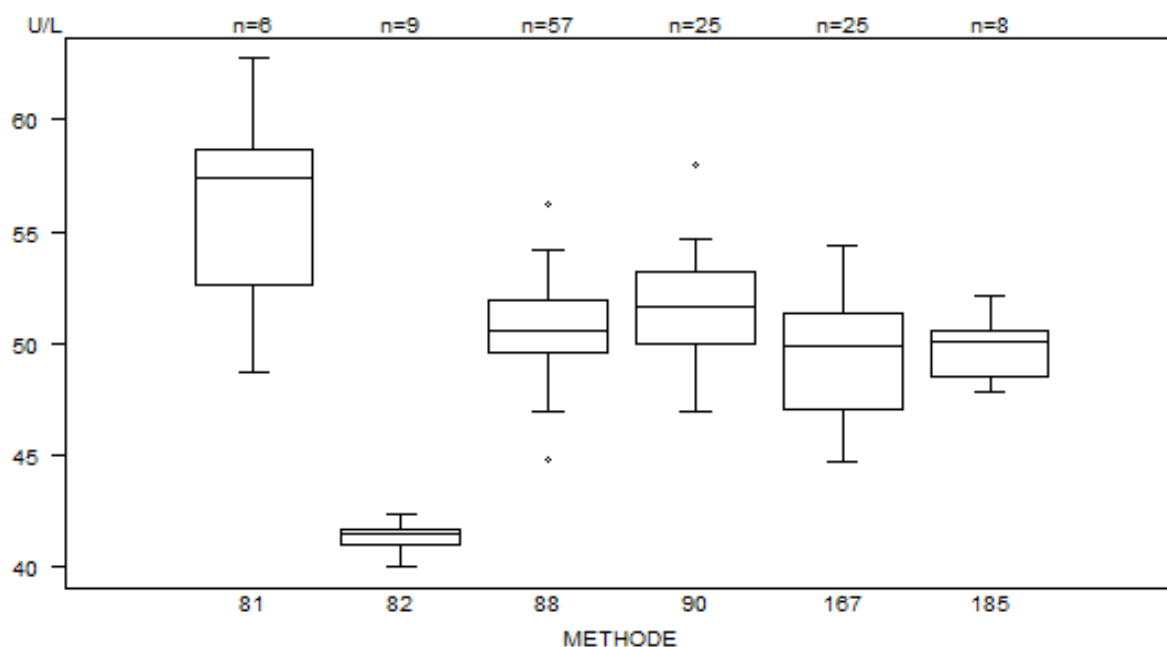


Nombre de citations pour la FSH: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
081 Beckman Coulter Access	0	1
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	2	0
090 Abbott Alinity	0	1

* dFSH: 12.0 % ± 1.2 U/L

HORMONE DE CROISSANCE

HORMONE DE CROISSANCE - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
003 DIASource - Radioactive Tracer	13.6	16.6		2
020 Beckman Coulter Access	15.1			1
021 Diasorin Liaison	20.6	1.4	6.9	14
023 Siemens Immulite	20.0	1.0	5.0	7
045 IDS	18.3	0.2	0.9	6
046 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	20.0			1
050 Snibe - Maglumi	27.5			1
185 Roche - Elecsys cobas e 801	19.2	0.4	2.1	15
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	19.3	1.4	7.3	47

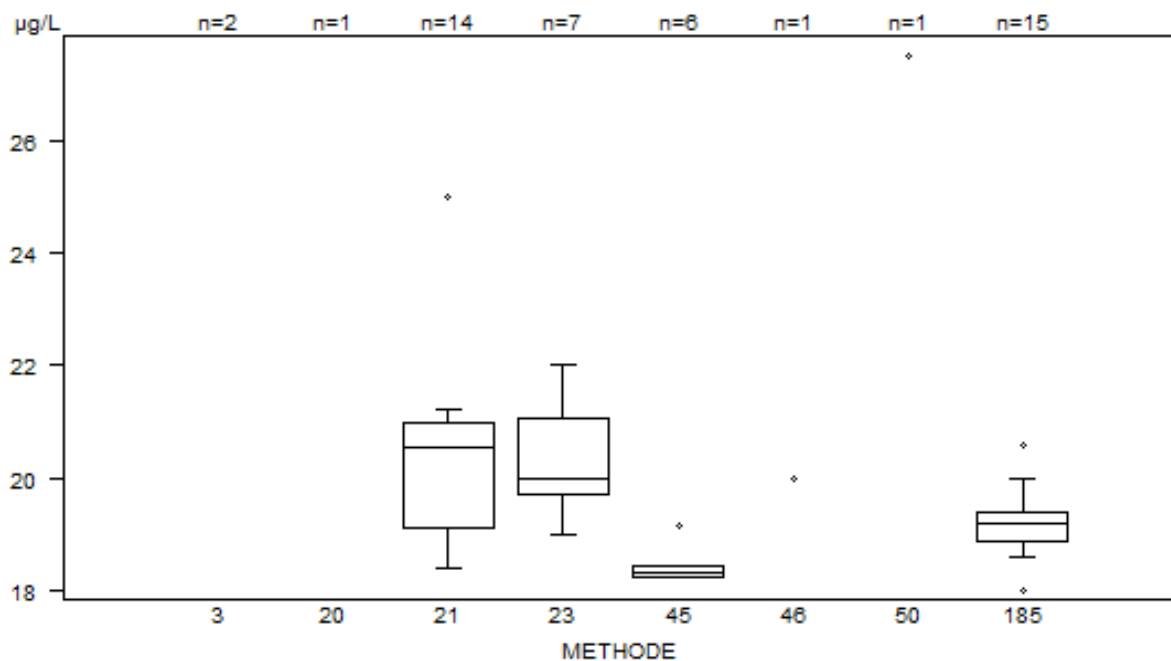

Données hors graphe

Méthode	Résultat
003	= 16.6 µg/L
003	= 13.6 µg/L
020	= 15.1 µg/L
021	= 15.7 µg/L
045	= 13.8 µg/L
185	= 17.8 µg/L

Nombre de citations pour l'Hormone de croissance: Échantillon R/22041


Méthode	Citation Z	Citation U
021 Diasorin Liaison	2	2
045 IDS	2	1
185 Roche - Elecsys cobas e 801	2	0

* dGH: 21% / ± 0.3 µg/L

HORMONE CHORIONIQUE GONADOTROPE HUMAINE (hCG)

HCG - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
047 BioMérieux Vidas – HCG intact	381.4 429.9			2
048 Siemens Immulite – HCG intact	590.0			1
081 Beckman Coulter Access – Total bhCG	169.9	14.6	8.6	6
083 OCD Vitros (gen. II) – Total bhCG	404.0	9.6	2.4	9
087 Roche Elecsys / Mod E/ Cobas e – Total bhCG	253.3	9.6	3.8	13
089 Abbott Architect – Total bhCG	198.0			1
091 Abbott Alinity - Total bhCG	188.0	7.9	4.2	29
167 Siemens - Atellica - Total hCG	147.5	6.9	4.7	26
185 Roche - Elecsys cobas e 801 – Total bhCG	257.0	10.4	4.0	69
385 Roche - Elecsys cobas e 801 – hCG	208.0	9.6	4.6	6
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	246.0	54.0	21.9	162

Les résultats de la méthode 083 OCD Vitros (gen. II) – Total bhCG montrent un biais positif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice

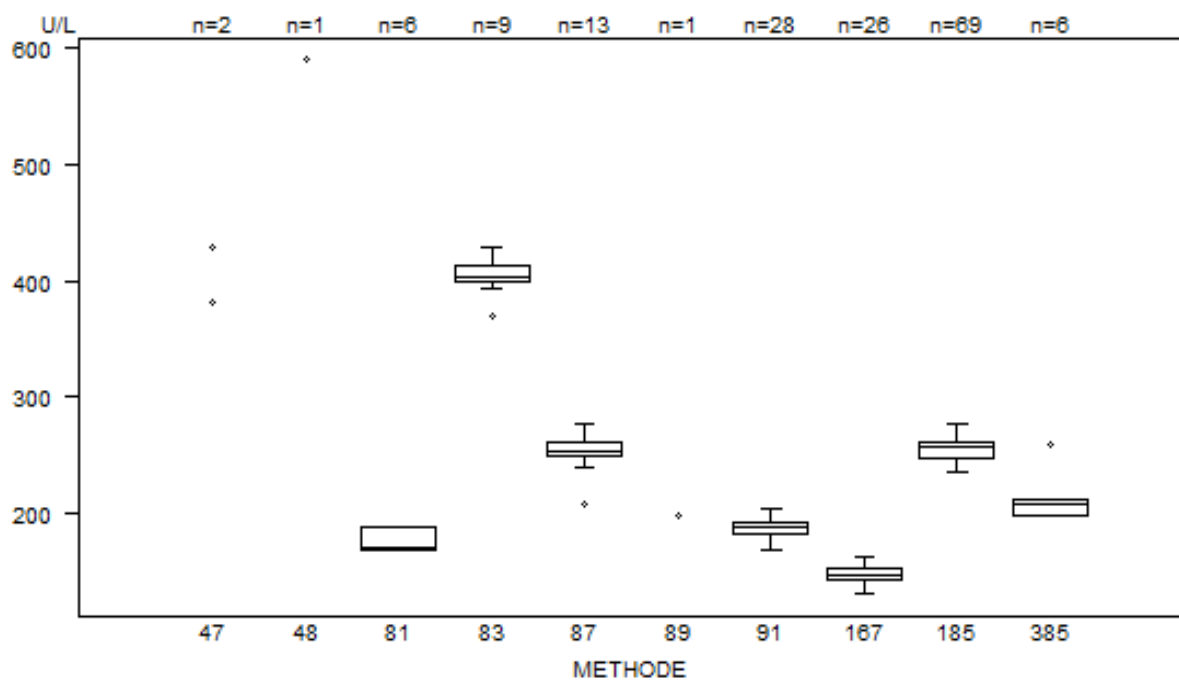


Nombre de citations pour l'hCG: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
083 OCD Vitros (gen. II) – Total bhCG	1	0
087 Roche Elecsys / Mod E/ Cobas e – Total bhCG	1	1
385 Roche - Elecsys cobas e 801 – hCG	1	1

* dhCG: 12% / ± 7.5 U/L

INSULINE

INSULINE - d (%) : 18.0	R/22041			
METHODE	Median pmol/L	SD pmol/L	CV %	N
010 Abbott Architect	101			1
012 Abbott Alinity	93	4	4.2	21
015 Beckman Coulter Access	101 111	111 112		5
017 Siemens Immulite	48			1
018 DiaSorin Liaison	160			1
019 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	131 138	135	136	4
167 Siemens - Atellica	120	9	7.7	22
185 Roche - Elecsys cobas e 801	130	6	4.6	44
190 OCD Vitros	108 110	109	110	4
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	120	16	13.6	103

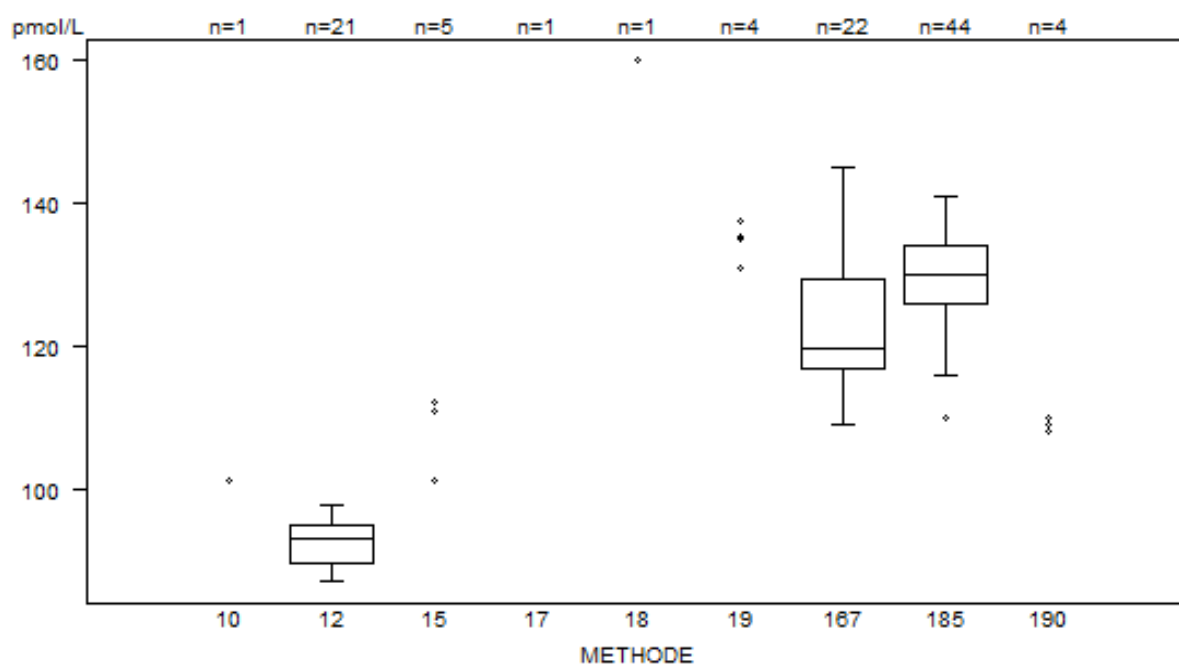

Données hors graphe

Méthode Résultat

017 = 48 pmol/L


Nombre de citations pour l'Insuline: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z
185 Roche - Elecsys cobas e 801	1

* dInsuline: 18%

HORMONE LUTEINISANTE (LH)

LH - d (%) : 11.0	R/22041			
METHODE	Median U/L	SD U/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	44.2	3.4	7.7	6
082 OCD Vitros	46.6	1.0	2.2	9
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	52.4	1.0	1.9	7
090 Abbott Alinity	37.6	1.3	3.4	25
167 Siemens - Atellica	46.6	1.3	2.7	25
185 Roche - Elecsys cobas e 801	50.4	1.1	2.2	59
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	48.3	4.2	8.7	131

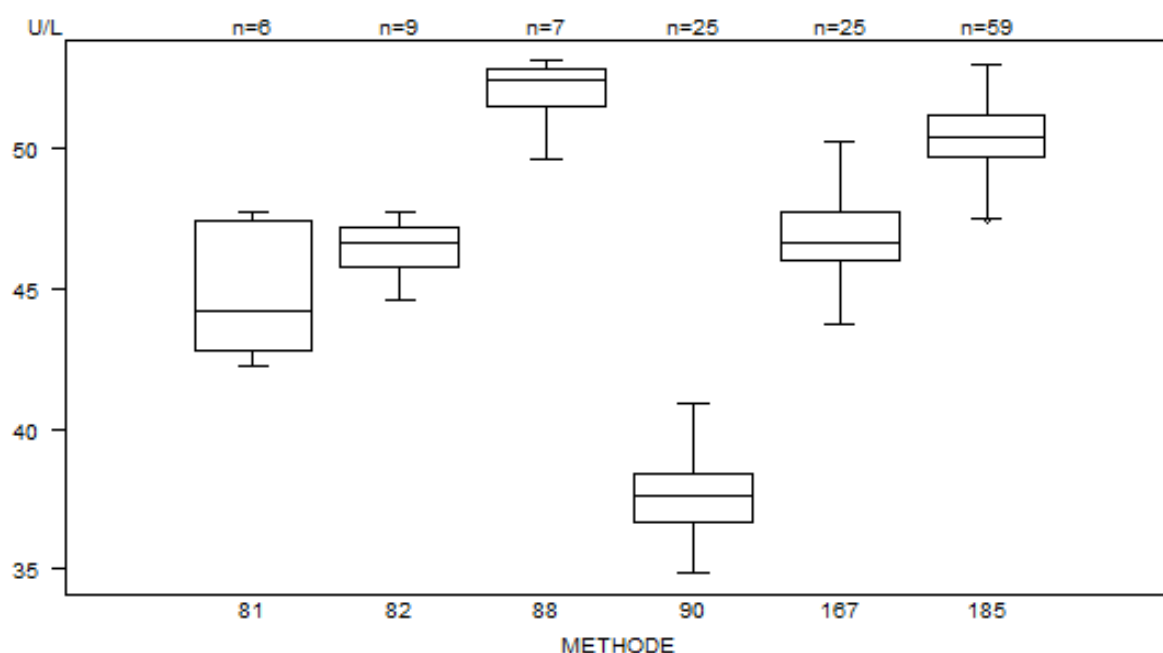

Données hors graphe

Méthode Résultat
 090 = 33.8 U/L
 088 = 55.6 U/L

Nombre de citations pour la LH: Échantillon R/22041


Méthode	Citation Z	Citation U
088 Roche-Elecsys/ Mod E / Cobas e	1	0

* dLH: 11% / ± 0.7 U/L

OESTRADIOL

OESTRADIOL - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
020 LC-MS/MS	501			1
036 Beckman Coulter Access	339	379	401	3
082 OCD Vitros	277	15	5.6	8
086 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (3rd gen)	412	9	2.2	9
089 Abbott Architect	329			1
090 Abbott Alinity	327	11	3.4	25
132 Beckman Coulter - Access sensitive estradiol	328	355	363	3
167 Siemens - Atellica	383	21	5.4	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	414	9	2.2	59
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	401	54	13.5	133


*L'analyse de la stabilité des résultats de l'Oestradiol obtenus lors de cette enquête pour l'échantillon R/22041 n'est pas satisfaisante. On constate une tendance à l'augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse (corrélation de Spearman, valeur Pz-scores = 0.0054 et valeur Pu-scores = 0.0028). **Ce paramètre ne sera donc pas évalué.***

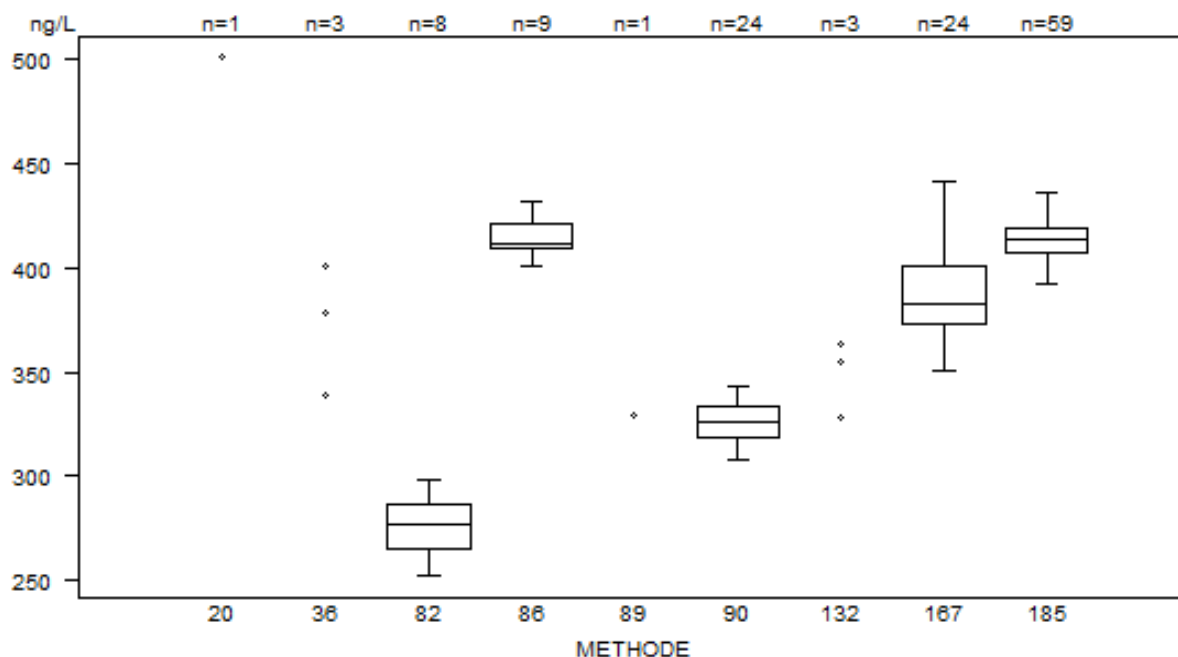

Aucun laboratoire n'a été cité lors de cette enquête pour l'Oestradiol : Échantillon R/22041.

PROGESTERONE

PROGESTERONE - d (%) : 18.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
021 LC-MS/MS	30.6			1
081 Beckman Coulter Access	25.5	5.8	22.6	6
082 OCD Vitros	23.7	0.7	3.0	7
087 Roche Mod E/ Cobas e (3rd gen)	27.0	0.5	1.9	6
088 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	24.6	25.7		2
089 Abbott Architect	21.8	22.7		2
090 Abbott Alinity	21.5	0.9	4.3	25
167 Siemens - Atellica	18.8	1.2	6.5	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.3	27.2	1.3	4.6	61
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	25.7	4.4	17.0	134

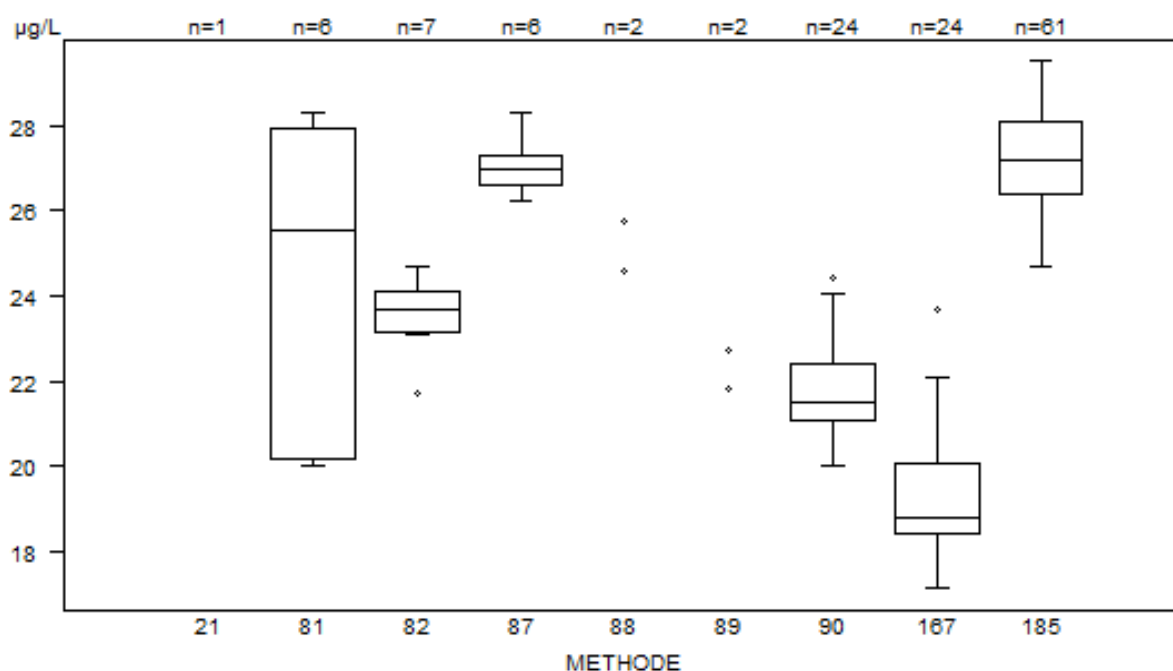

Données hors graphe

Méthode Résultat
021 = 30.6 µg/L

Nombre de citations pour la Progesterone: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
081 Beckman Coulter Access	0	2
090 Abbott Alinity	1	0
167 Siemens - Atellica	1	1


* dProgesteron: 18% / ± 1.0 µg/L

PROLACTINE

PROLACTINE - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
029 Abbott Alinity	52.9	2.5	4.7	22
030 Abbott Architect	46.9	52.0		2
036 Beckman Coulter Access	32.7 39.8	35.7 40.8	39.4	5
043 Diasorin Liaison	51.2			1
050 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	60.3	60.8	65.1	3
053 OCD Vitros	39.3	0.9	2.2	7
167 Siemens - Atellica	33.7	1.4	4.1	23
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	55.9	1.6	2.9	52
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	53.8	12.5	23.2	115

L'analyse de la stabilité des résultats de la Prolactine obtenus lors de cette enquête pour l'échantillon R/22041 n'est pas satisfaisante. On constate une tendance à l'augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse (corrélation de Spearman, valeur Pz-scores = 0.0068 et valeur Pu-scores = 0.0112). Ce paramètre ne sera donc pas évalué.

Un nombre limité de participants ont signalé la présence de **macroprolactine**.

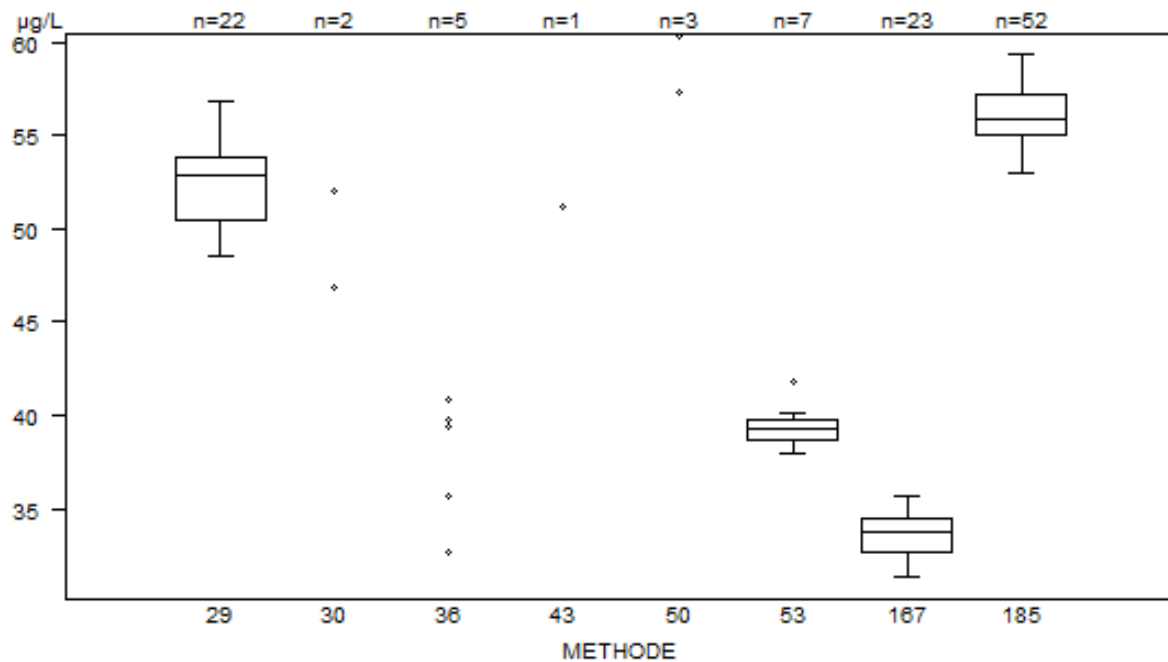

Données hors graphe

Méthode Résultat

185 = 9.1 µg/L

185 = 23.3 µg/L

050 = 60.8 µg/L

050 = 65.1 µg/L

167 = 853.2 µg/L

185 = 60.6 µg/L


Nombre de citations pour la Prolactine: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	2

* dProlactine: 16% / ± 1.4 µg/L

ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE (PSA)


PSA - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
045 DiaSorin Liaison	15.37			1
081 Beckman Coulter Access	21.64	3.11	14.4	6
084 OCD Vitros - Gen.2	18.70	0.78	4.2	7
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	19.80	0.66	3.3	9
089 Abbott Architect	14.80			1
090 Abbott Alinity	14.85	1.11	7.5	23
167 Siemens - Atellica	17.64	1.05	6.0	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801	19.90	0.67	3.4	53
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	18.95	2.13	11.2	124

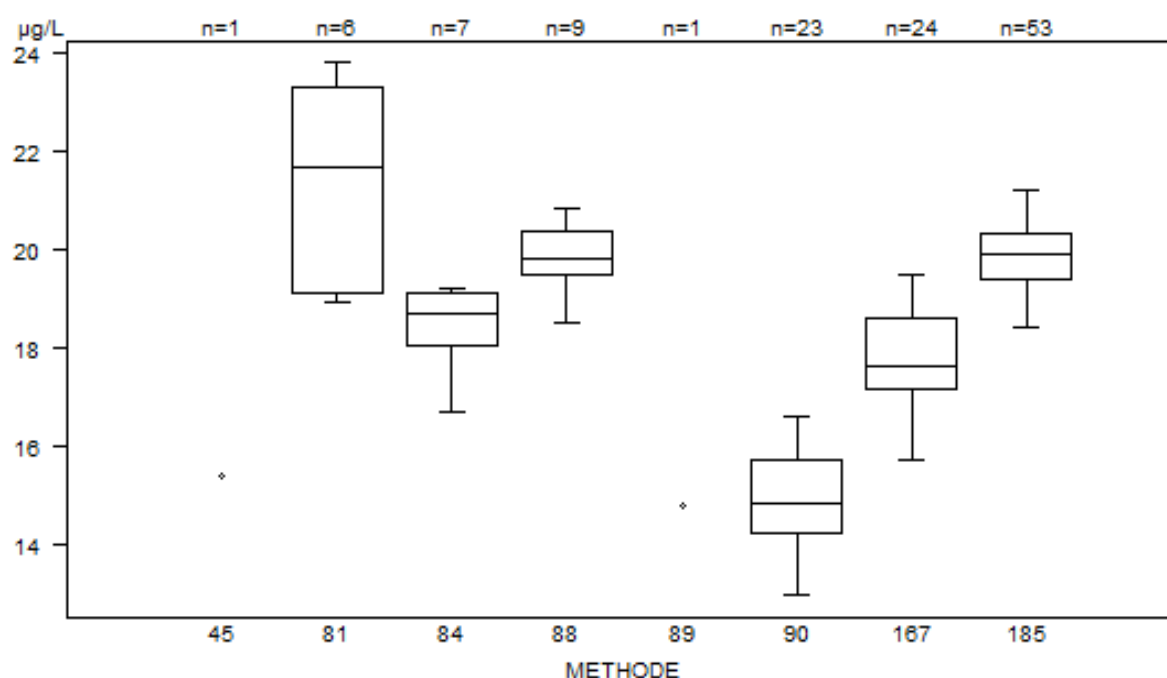

Aucun laboratoire n'a été cité lors de cette enquête pour la PSA: Échantillon R/22041.

TESTOSTERON

TESTOSTERON - d (%) : 20.0	R/22041			
METHODE	Median nmol/L	SD nmol/L	CV %	N
020 LC-MS	30.5	31.1	35.1	3
032 Beckman Coulter Access	17.8 21.5	20.4	21.0	4
045 BioMérieux Vidas - Gen.2	26.8	27.8		2
050 Home made	27.8			1
082 OCD Vitros	25.4 27.1	25.7	25.9	5
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	26.1	0.7	2.8	6
089 Abbott Architect	31.6			1
091 Abbott Alinity - Gen.2	33.2	1.1	3.2	19
167 Siemens - Atellica - Gen.2	26.1	1.0	4.0	16
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	26.6	1.1	4.0	40
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	26.8	2.7	10.1	97

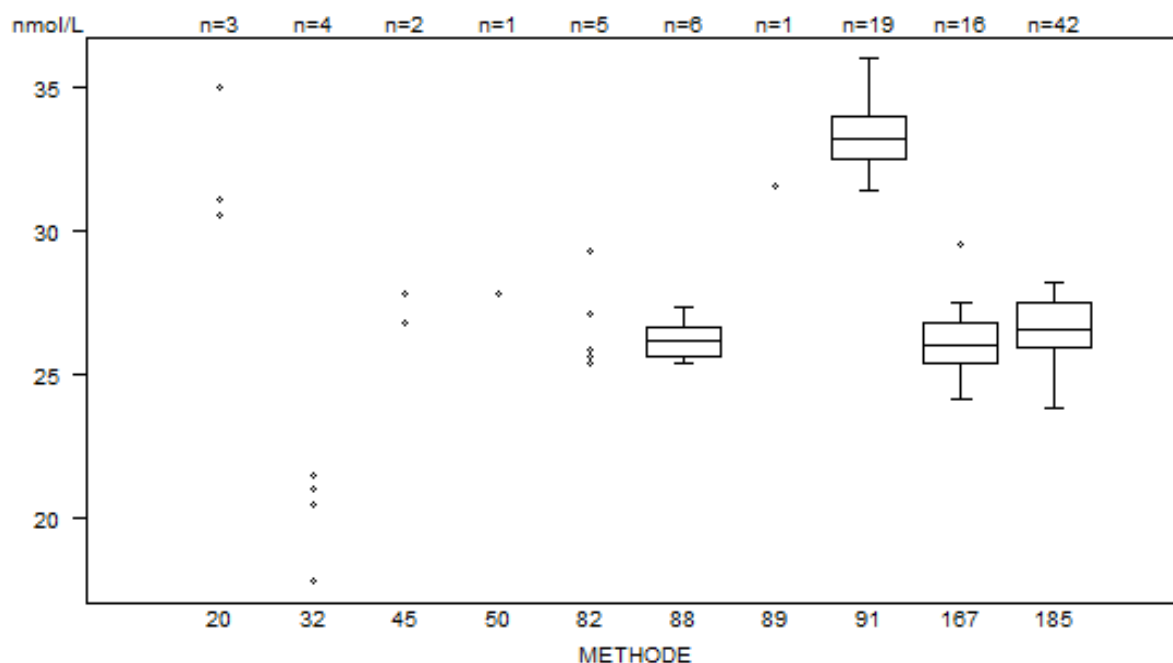

Données hors graphe

Méthode Résultat

185 = 8.1 nmol/L

185 = 771 nmol/L

185 = 89.1 nmol/L

Nombre de citations pour la Testosterone: Échantillon R/22041


Méthode	Citation Z	Citation U
167 Siemens - Atellica - Gen.2	1	0
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	2

* dTestosteron: 20% / $\pm$ 1.2 nmol/L

THYROGLOBULINE

THYROGLOBULINE - d (%) : 17.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
020 Beckman Coulter Access	38.7 45.5	44.0 46.6	44.7	5
024 DiaSorin Liaison	45.0	1.7	3.8	8
029 Siemens Immulite	17.3	2.6	15.0	6
030 Siemens Atellica	24.3	1.7	7.0	7
033 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	57.0	2.3	4.0	8
089 Abbott Architect	61.3			1
090 Abbott Alinity	55.5	3.0	5.5	7
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	60.2	3.2	5.2	36
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	56.9	11.6	20.3	78

Les résultats des méthodes 029 Siemens Immulite et Siemens Atellica montrent un biais négatif. Il est raisonnable de supposer qu'il s'agit d'un effet de matrice.

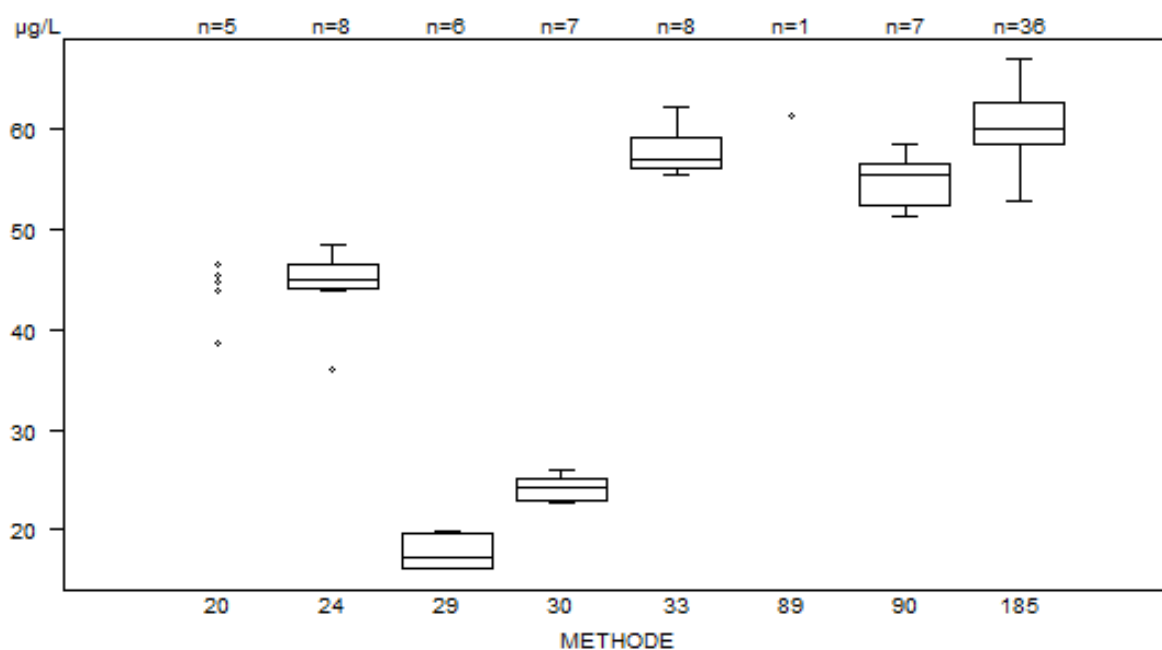


Nombre de citations pour la Thyroglobuline: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
024 DiaSorin Liaison	1	1

* dThyroglobuline: 17% / $\pm$ 2.2 µg/L

THYREOSTIMULINE (TSH)

TSH - d (%) : 9.0	R/22041			
METHODE	Median mU/L	SD mU/L	CV %	N
079 Beckman Coulter Access - Gen.3	30.09			1
081 Beckman Coulter Access	30.30 33.97	30.70 37.68	31.37	5
082 OCD Vitros	34.83	2.61	7.5	9
088 Roche Elecsys / Mod E / Cobas e	28.85	1.64	5.7	7
089 Abbott Architect	25.06			1
090 Abbott Alinity	25.71	0.81	3.1	29
167 Siemens - Atellica	30.65	0.97	3.2	26
185 Roche - Elecsys cobas e 801	27.90	0.82	2.9	64
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	28.05	2.24	8.0	142

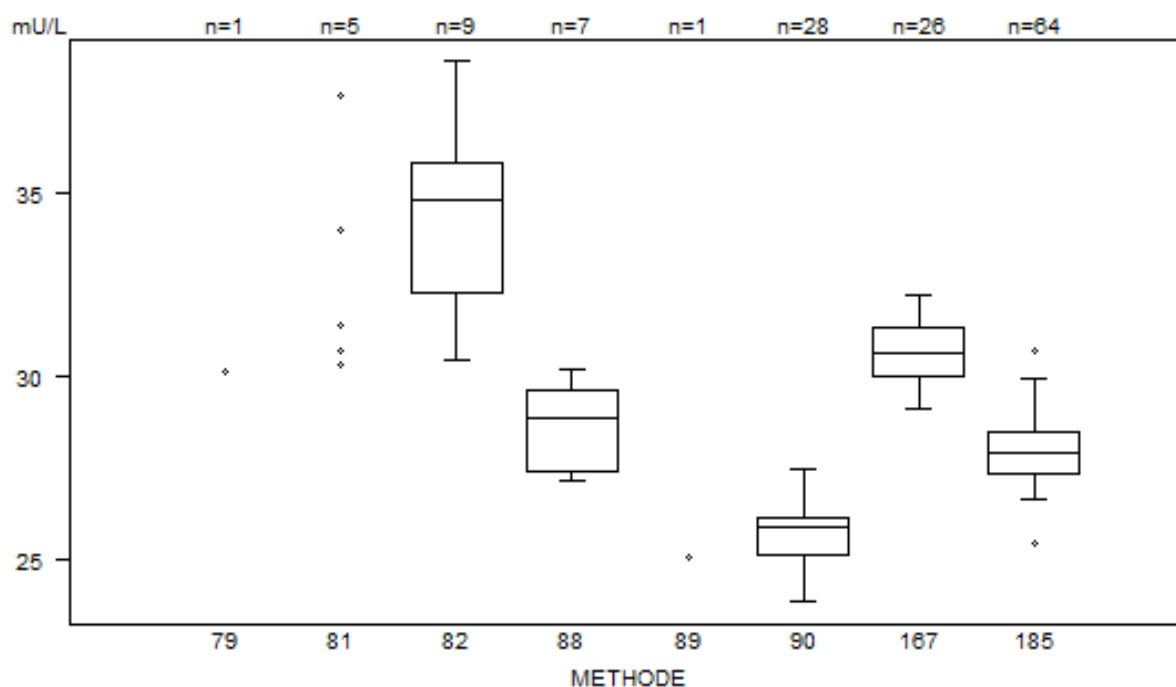


Nombre de citations pour la TSH: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
082 OCD Vitros	0	3
185 Roche - Elecsys cobas e 801	2	1

* dTSH: 9% / $\pm$ 0.2 mU/L

VITAMINE B12

VIT B12 - d (%) : 21.0	R/22041			
METHODE	Median ng/L	SD ng/L	CV %	N
081 Beckman Coulter Access	1178	70	5.9	6
082 OCD Vitros	1680			1
087 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	1647	82	5.0	6
089 Abbott Architect	1283	1585		2
090 Abbott Alinity	935	298	31.9	23
167 Siemens - Atellica	1903	150	7.9	24
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	1660	56	3.4	62
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	1653	227	13.7	124

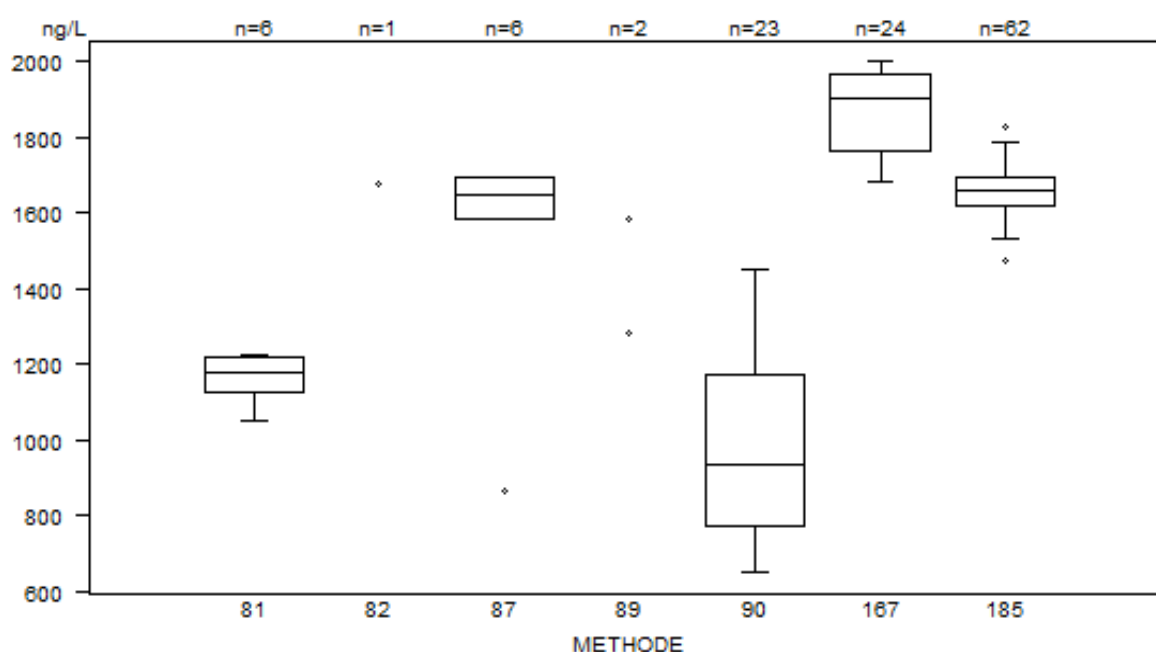

Nombre de citations pour la Vitamine B12: Échantillon R/22041

Méthode	Citation Z	Citation U
087 Roche Elecsys/ Mod E/ Cobas e (2nd gen)	1	1
090 Abbott Alinity	0	14
185 Roche - Elecsys cobas e 801 - Gen.2	2	0

* dVIT B12: 21% / ± 85 ng/L

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.