

**RISQUES BIOLOGIQUES POUR LA SANTE
QUALITE DES LABORATOIRES**

EVALUATION EXTERNE DE LA QUALITE*

**RAPPORT GLOBAL DEFINITIF
MONITORING THERAPEUTIQUE
ENQUETE 2026/1**

* AR 03/12/1999

Sciensano/MON.THER./71/FR

Risques biologiques pour la santé
Qualité des laboratoires
Rue Juliette Wytsman 14
1050 Bruxelles | Belgique

www.sciensano.be

COMITE D'EXPERTS

Sciensano					
Secrétariat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
VANTORRE Audrey	Coordinateur	TEL:	02/642.57.55		
		E-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be		
LENGA Yolande	Coordinateur remplaçant	TEL:	02/642.53.96		
		E-mail:	yolande.lenga@sciensano.be		
Experts		Institution			
Apr. Klin. Biol. Croes Kathleen		AZ Groeninge			
Apr. Klin. Biol. Haufroid Vincent		Cliniques universitaires Saint-Luc			
Apr. Klin. Biol. Van den Eede Nele		UZ Leuven			
Apr. Klin. Biol. Catry Emilie		CHU UCL Namur – UCLouvain			
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven		EpiCURA - Hornu			
Dr. Dubois Nathalie		CHU Liège			
Apr. Klin. Biol. Oyaert Matthijs		Uz Gent			
Apr. Klin. Biol. Piqueur Marian		ZAS			

Un draft de ce rapport a été transmise aux experts le: 15/05/2026.

Ce rapport a été discuté lors de la réunion du Comité d'experts du: 22/05/2026.

Responsabilités :

Le Comité d'experts a été consulté pour avis au sujet du contenu du rapport global, de l'interprétation des résultats, des critères d'évaluation et de l'organisation des prochaines évaluations. La responsabilité du choix des échantillons utilisés et de la conception finale de l'enquête Monitoring Therapeutique est portée par le service Qualité des laboratoires de Sciensano.

Autorisation du rapport : par A. Vantorre, coordinateur.

Date de publication : 29/05/2026

Tous les rapports sont également consultables sur notre site web:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-monitoring-therapeutique>

TABLE DES MATIERES

TABLE DE CONVERSION – MONITORING THERAPEUTIQUE.....	4
INTRODUCTION	5
HOMOGENÉITÉ DES ÉCHANTILLONS	5
STABILITÉ DES ÉCHANTILLONS.....	5
LA VALEUR CIBLE	5
MISE À JOUR DES TROUSSES.....	5
TROUSSES PÉRIMÉES	5
COMMENT ENCODER DES RÉSULTAT CENSURÉS (< OU > QUE LA VALEUR SEUIL) DANS LE TOOLKIT ?	6
MISE À DISPOSITION DES RAPPORTS	6
INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL	7
INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ENQUETE	10
INFORMATIONS REPRISES DANS LE TOOLKIT	10
NATURE DES ÉCHANTILLONS	10
RÉSULTATS BRUTS	10
CARBAMAZEPINE	12
DIGOXINE	13
GENTAMICINE.....	15
PARACETAMOL	16
PHENYTOÏNE	17
ACIDE VALPROÏQUE	18
VANCOMYCINE.....	19

TABLE DE CONVERSION – MONITORING THERAPEUTIQUE

AMIKACINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.58	⇒	
CARBAMAZEPINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.24	⇒	
DIGOXINE	µg/L	x	1.00	⇒	µg/L
	ng/mL	x	1.00	⇒	
	nmol/L	x	0.78	⇒	
GENTAMICINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.48	⇒	
LITHIUM	mmol/L	x	1.00	⇒	mmol/L
	mEq/L	x	1.00	⇒	
PARACETAMOL	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.15	⇒	
PHENYTOÏNE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.25	⇒	
ACIDE SALICYLIQUE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	mmol/L	x	138.12	⇒	
ACIDE VALPROIQUE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.14	⇒	
VANCOMYCINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	1.45	⇒	

INTRODUCTION

Homogénéité des échantillons

L'échantillon a été certifié homogène par la firme Randox.

Stabilité des échantillons

L'échantillon a été certifié stable par la firme Randox.

La valeur cible

La valeur cible est la médiane de la méthode si le nombre de résultats pour cette méthode est supérieur ou égal à 6. Si le nombre de résultats est inférieur à 6, les laboratoires ne sont pas évalués. Si le nombre de valeurs censurées est trop élevé le Z score n'est pas non plus calculé.

Mise à jour des trousse

Afin de garantir la validité des résultats du contrôle externe, il est important que toutes les informations relatives à la méthode et la trousse utilisées soient correctes. Nous constatons, à chaque enquête, qu'un petit nombre de laboratoires oublie de contrôler la validité de ces informations. Si vous n'avez pas trouvé votre méthode ou trousse dans le toolkit, n'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible, en nous envoyant un e-mail avec en pièce jointe un scan de la notice de votre trousse à l'adresse suivante: audrey.vantorre@sciensano.be.

Trousses périmées

Lorsque la dernière trousse fabriquée arrive à péremption, sa référence disparaît du toolkit. Un message d'alerte apparaît à l'écran : « Votre kit est périmé. Pourriez-vous introduire votre nouveau numéro de catalogue ? ». Il est alors impératif que vous reparamétriez votre nouvelle trousse et ce, **même s'il ne s'agit que d'un changement de numéro de catalogue.**

Pour toutes les méthodes « kit dépendantes », le principe de la méthode est attribué automatiquement.

Comment encoder des Résultats censurés (< ou > que la valeur seuil) dans le toolkit ?

Exemple d'encodage:

The screenshot shows the 'DIGOXINE' toolkit interface. At the top, a green header displays 'DIGOXINE'. Below this, a grey box contains the following information: 'Kit: ABBOTT Digoxin (1P32 - 25)', 'Méthode: immunoassay, chemical marker, luminescence', and 'Appareil de mesure: ABBOTT Architect i2000SR'. A button labeled 'Définition paramètres pour DIGOXINE' is present. Below the button, the 'Résultat (Opérateur+Valeur+Unité)' field is shown with a dropdown menu open, displaying options '<', '=', '>', and '<'. The unit 'µg/L' is selected. A 'Texte libre' field is also visible.

Les signes « > » et « < » se trouvent juste **devant** la case où le **résultat quantitatif** est encodé.

Mise à disposition des rapports

Nous vous demandons d'envoyer vos réponses le plus rapidement possible, ceci afin de nous permettre de libérer une première version non validée du rapport individuel dans les jours qui suivent la date effective de clôture de l'encodage des données. Pour les laboratoires ayant un problème ponctuel relatif à ces encodages, il est possible de prolonger l'accès au toolkit. Toutefois ceci retarde la production des rapports pour l'ensemble du groupe. Nous vous demandons donc d'être attentifs et de respecter les délais proposés dans l'intérêt de tous. Une fois les rapports individuels non validés accessibles, vous disposez de 7 jours afin de nous faire part de vos remarques éventuelles. Nous encourageons les laboratoires à relire attentivement leurs résultats après encodage, (cfr. les analyses non automatisés en routine) en vue de minimiser toute erreur (unité, encodage, autre...). Si malgré tout vous remarquez une erreur d'encodage de votre part, sur votre rapport individuel non validé, veuillez nous le signaler.

Après validation de l'enquête par le Comité d'experts, le rapport global définitif est mis à disposition sur notre site web à l'adresse suivante:

<https://www.sciensano.be/fr/qualite-des-laboratoires/eeq-monitoring-therapeutique>

INTERPRETATION DU RAPPORT INDIVIDUEL

En plus de ce rapport global, vous avez également accès à un rapport individuel via le toolkit.

Ci-dessous vous pouvez trouver des informations qui peuvent aider à interpréter ce rapport.

La position de vos résultats quantitatifs est donnée d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous.

Les informations suivantes sont reprises:

- Votre résultat (R)
- Votre méthode
- La médiane globale (M_G):
la valeur centrale des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- L'écart-type global (SD_G):
mesure de la dispersion des résultats fournis par tous les laboratoires, toutes méthodes confondues.
- La médiane globale de votre méthode (M_M):
la valeur centrale des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- L'écart-type de votre méthode (SD_M):
mesure de la dispersion des résultats fournis par les laboratoires utilisant la même méthode que vous.
- Le coefficient de variation CV (exprimé en %) pour tous les laboratoires et pour les laboratoires utilisant la même méthode que vous:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ et $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- Le score Z:
la différence entre votre résultat et la médiane de votre méthode (exprimée en unités d'écart type):
 $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ et $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Votre résultat est cité si $|Z_M| > 3$.
- Le score U:
l'écart relatif de votre résultat par rapport à la médiane de votre méthode (exprimé en %): $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ et $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Votre résultat est cité si $|U_M| > d$, où « d » est la limite fixe d'un paramètre déterminé, en d'autres termes le % maximal de déviation acceptable entre le résultat et la médiane de la méthode.
- L'interprétation graphique de la position de votre résultat (R), d'un côté en comparaison avec tous les résultats de tous les participants et de l'autre côté en comparaison avec les résultats des participants utilisant la même méthode que vous, basée sur la méthode de Tukey, pour chaque paramètre et pour chaque échantillon analysé.

R : votre résultat

$M_{M/G}$: médiane

$H_{M/G}$: percentiles 25 et 75

$I_{M/G}$: limites intérieures ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: limites extérieures ($M \pm 4.7 SD$)

Le graphique global et celui de votre méthode sont exprimés selon la même échelle, ce qui les rend comparables. Ces graphiques vous donnent une indication approximative de la position de votre résultat (R) par rapport aux médianes ($M_{M/G}$).

Vous pouvez trouver plus de détails dans les brochures qui sont disponibles sur notre site web à l'adresse suivante:


<https://www.sciensano.be/fr/evaluation-externe-de-la-qualite/sante-clinique-eeq-biologie-clinique>

- [Brochure d'information générale EEQ](#)
- [Méthodes statistiques appliquées à l'EEQ](#)
- [Traitement des valeurs censurées](#)

Représentation graphique

A côté des tableaux de Résultat, une représentation graphique en "boîte à moustaches" est parfois ajoutée. Elle reprend les éléments suivants pour les méthodes avec au moins 6 participants:

- un rectangle qui va du percentile 25 (P_{25}) au percentile 75 (P_{75})
- une ligne centrale représente la médiane des Résultats (P_{50})
- une ligne inférieure qui représente la plus petite valeur $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- une ligne supérieure qui représente la plus grande valeur $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- tous les points en dehors de cet intervalle sont représentés par un rond.

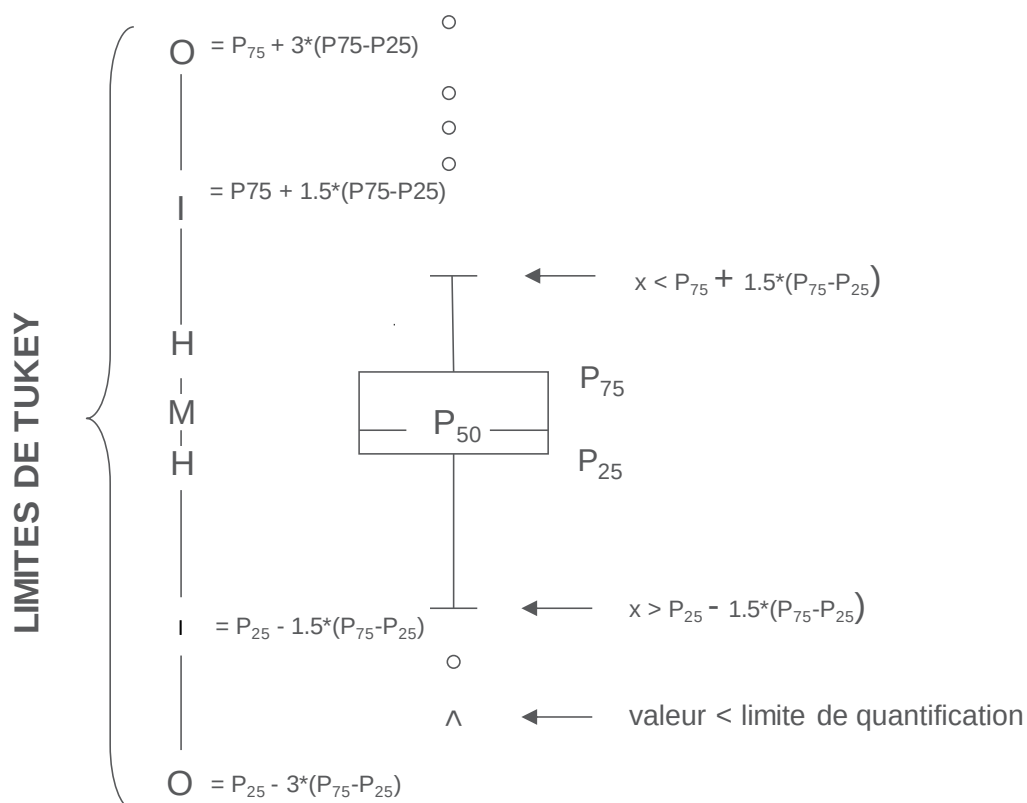

Limites correspondantes en cas de distribution normale

INFORMATIONS SPECIFIQUES A L'ENQUETE

L'échantillon de l'enquête 2026/1 a été envoyé le 02/02/2026. L'encodage des résultats a été clôturé le 16/02/2026. Le 26/02/2026, les rapports individuels non validés étaient accessibles dans le toolkit. La validation a été réalisée le 29/05/2026. Depuis cette date, les rapports individuels définitifs sont disponibles via le toolkit. Ce rapport a été publié sur notre site web le 29/05/2026.

Informations reprises dans le toolkit

Veillez effectuer les analyses le plus rapidement possible après réception de l'échantillon ou au plus tard le 06/02/2026. Conservez l'échantillon entre 2 et 8°C.

R/22041 : Veuillez traiter ce produit de la même manière que les échantillons de patients.

Laissez le produit revenir à température ambiante (15 à 25 °C) avant de procéder à l'analyse. Agiter doucement le flacon pour assurer l'homogénéité du produit. Évitez la formation de mousse. Après chaque utilisation, remplacer rapidement le bouchon.

Cet échantillon est également destiné aux EEQ Immunoessais et Marqueurs Cardiaques 2026/1.

Nature des échantillons

A l'occasion de cette enquête 2026/1, un échantillon liquide congelé (4mL) de la firme Randox a été envoyés à tous les participants : Notamment l'échantillon **R/22041**.

Résultats bruts

Les résultats bruts anonymisés peuvent être obtenus sur demande à audrey.vantorre@sciensano.be.

Avant-Propos

Lorsque la variabilité analytique d'une méthode donnée pour un paramètre donné comparée à l'historique de notre base de données est basse, un recalcul des statistiques de base est réalisé après exclusion des outliers si présents dans le groupe de pairs concerné afin de voir si oui ou non des résultats cités abusivement pour l'évaluation Z peuvent être récupérés. C'est une démarche supplémentaire pour évaluer au mieux les laboratoires. Il appartient en outre au laboratoire lui-même de faire une analyse critique de ses propres citations. L'analyse post hoc de la stabilité des échantillons sur base des résultats obtenus par les participants peut mener à la non-évaluation d'un paramètre lorsque jugé nécessaire.

Suite aux résultats de l'étude de **basse variabilité**, **certaines modifications ont été apportées aux rapports de l'EEQ Monitoring Therapeutique 2026/1.**

Veuillez **lire attentivement ces changements** et vérifier s'ils ont eu un impact sur votre rapport individuel.

Étude de stabilité:

Sur base des résultats des participants, Sciensano effectue une post-analyse afin de vérifier l'homogénéité et la stabilité des échantillons. Si l'analyse de stabilité révèle qu'un paramètre ne satisfait pas aux exigences, notamment en raison d'une augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse, celui-ci peut ne pas être évalué. Les paramètres figurant dans le tableau ci-dessous ne répondent pas aux exigences de stabilité et **ne sont donc pas évalués** :

Si vous avez rapporté certains de ces paramètres, ceux-ci ne sont donc plus évalués:


Échantillon	Paramètre	Valeur P pour les scores Z (corrélation de Spearman)	Valeur P pour les scores U (corrélation de Spearman)
R/22041	Digoxine	0.0359	0.1732
R/22041	Vancomycine	0.0071	9×10^{-4}

Étude de basse variabilité:

Suite aux résultats de l'étude de basse variabilité, **l'écart type robuste**, habituellement utilisé pour les calculs d'EEQ, est **conservé pour tous les paramètres** et pour tous les groupes de pairs.

CARBAMAZEPINE

CARBAMAZEPINE - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
012 High Performance Liquid Chromatography	14.2			1
019 Abbott - Architect - Immunoassay - Chemiluminescence	16.4 16.7			2
022 Abbott - Architect - PETINIA	14.6			1
023 Abbott Alinity	14.1	1.0	7.0	12
074 Roche / Hitachi Mod. cobas c - KIMS	15.4			1
075 Roche / Hitachi cobas c - Gen.4	15.8	0.5	2.9	15
076 Roche / Hitachi cobas c 503/ c 703/ Pro/ Pure	16.1	0.4	2.3	21
078 Thermo Scientific - CEDIA	14.8			1
085 Siemens Immulite	13.0			1
087 Siemens Atellica CH	15.0	0.1	0.7	12
090 OCD Vitros	15.9 17.9	16.3 19.4	17.0	5
101 LC-MS/MS	> 15.0			1
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	15.7	0.9	5.7	73

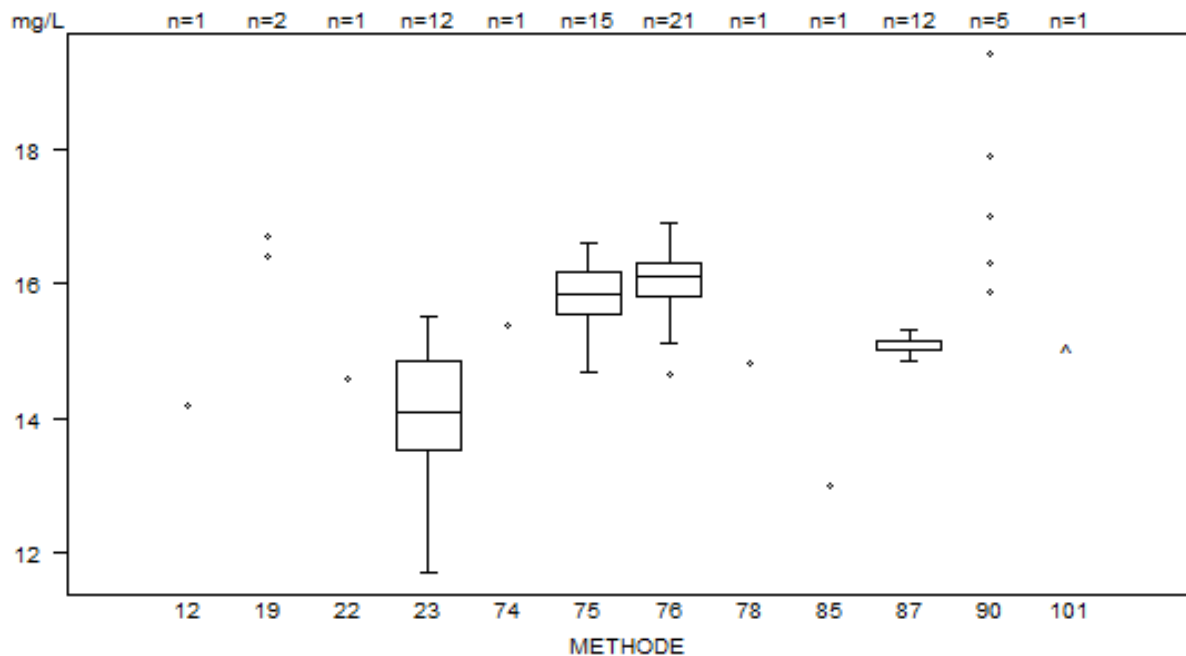

Nombre de citations pour la Carbamazepine: Échantillon R/22041


Méthode	Z-citatie	U-citatie
023 Abbott Alinity	0	1
076 Roche / Hitachi cobas c 503/ c 703/ Pro/ Pure	1	0

* dCarbamazepine: 12%

DIGOXINE

DIGOXINE - d (%) : 17.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
020 Roche/Hitachi - cobas c 701/702	2.57 2.70	2.60	2.61	4
021 Roche/Hitachi - cobas c 501	2.66	0.07	2.5	13
023 Roche - Elecsys cobas e 801	2.65	0.09	3.2	28
033 Abbott Alinity	2.70	0.08	2.9	19
034 Abbott Architect	1.90			1
041 OCD Vitros	2.11 2.30	2.28 2.33	2.29	5
045 Siemens Atellica CH	3.20			1
050 Siemens - Atellica	2.97	0.09	3.2	15
060 Olympus	2.80			1
081 Beckman Coulter Access	2.60 2.73			2
088 Roche Elecsys Modular E Cobas e	2.61	0.10	4.0	8
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	2.70	0.15	5.5	97

L'analyse de la stabilité des résultats de Digoxine obtenus lors de cette enquête pour l'échantillon R/22041 n'est pas satisfaisante. On constate une tendance à l'augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse (corrélation de Spearman, valeur Pz-scores = 0.0359 et valeur Pu-scores = 0.1732). **Ce paramètre ne sera donc pas évalué.**

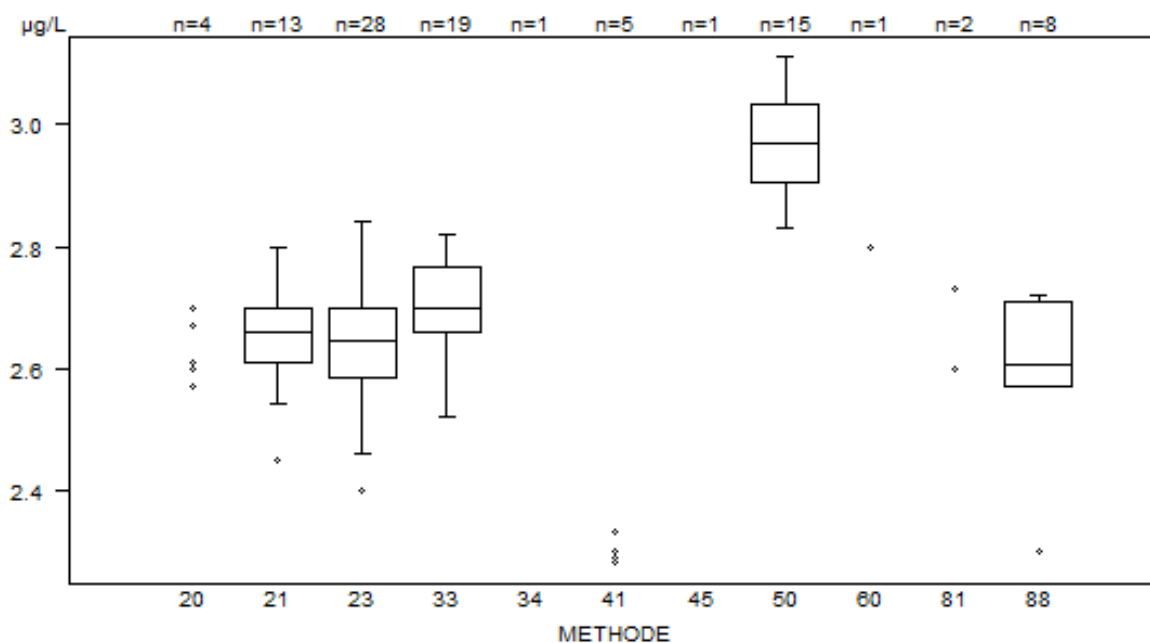

Données hors graphe

Method	Résultat
034	= 1.9 µg/L
041	= 2.11 µg/L
021	= 3.3 µg/L
045	= 3.2 µg/L
088	= 3.4 µg/L


Nombre de citations pour la Digoxine: Échantillon R/22041

Méthode	Z-citatie	U-citatie
021 Roche/Hitachi - cobas c 501	2	1
023 Roche - Elecsys cobas e 801	0	0

* dDigoxine: 17%

GENTAMICINE

GENTAMICINE - d (%) : 18.0		R/22041			
METHODE		Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
018 Abbott Alinity		4.85	0.11	2.2	8
052 Microgenics		4.34			1
060 Olympus		5.05			1
073 Roche/Hitachi - CEDIA		3.81	4.47	4.55	3
074 Roche / Hitachi Mod. cobas c - KIMS		3.74	0.20	5.5	19
087 Siemens Atellica CH		4.15	0.23	5.5	7
090 OCD Vitros		4.87			1
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)		3.90	0.67	17.1	40

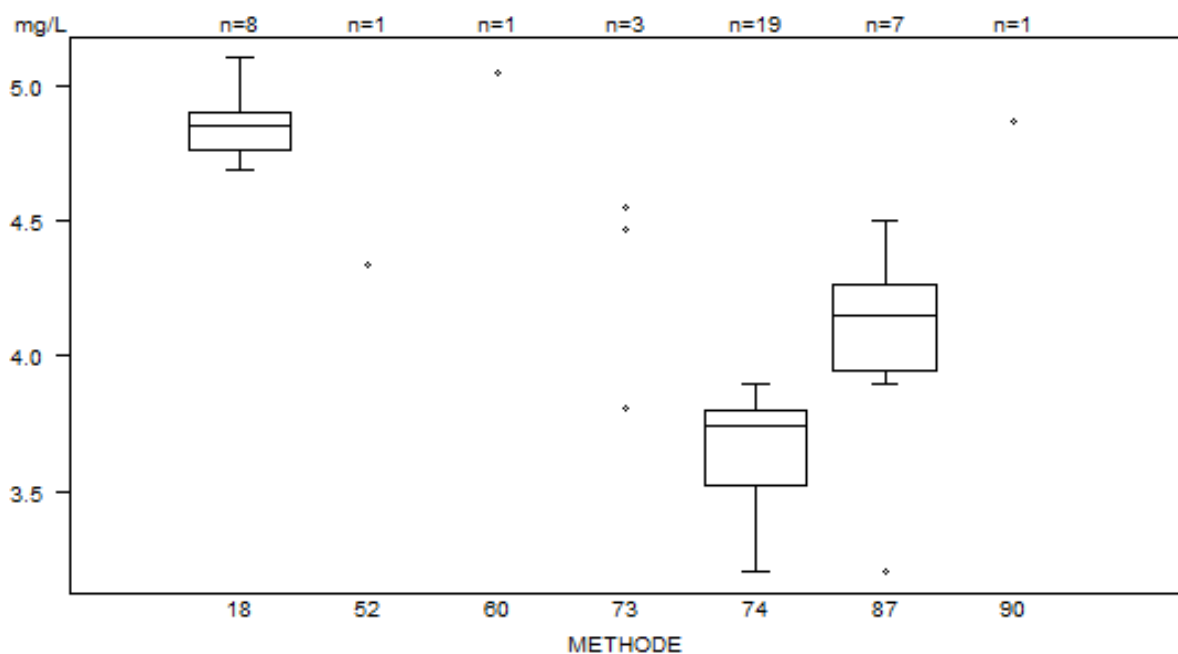

Données hors graphe

Méthode Résultat
74 = 2.8 mg/L


Nombre de citations pour la Gentamicine: Échantillon R/22041

Méthode	Z-citatie	U-citatie
074 Roche / Hitachi Mod. cobas c - KIMS	1	1
087 Siemens Atellica CH	1	1

* dGentamicine: 18%

PARACETAMOL

PARACETAMOL - d (%) : 13.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
022 Abbott	71.1	1.0	1.4	16
052 Microgenics - Immunoenzymatic assay - Spectrometry	69.8			1
072 Roche Cobas Integra - cobas c	60.4 65.4	63.0	64.0	4
073 Roche/Hitachi cobas c (2nd gen.)	71.8	5.6	7.7	38
074 Roche - Hitachi Modular	60.6	66.8	74.6	3
087 Siemens Atellica CH	67.6	0.7	1.1	13
090 OCD Vitros	60.7	0.6	0.9	7
095 Sekisui Diagnostics - Abbott	68.0	74.0		2
100 Siemens Emit - Beckman Coulter AU	63.7	75.4		2
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)	69.5	4.7	6.8	87

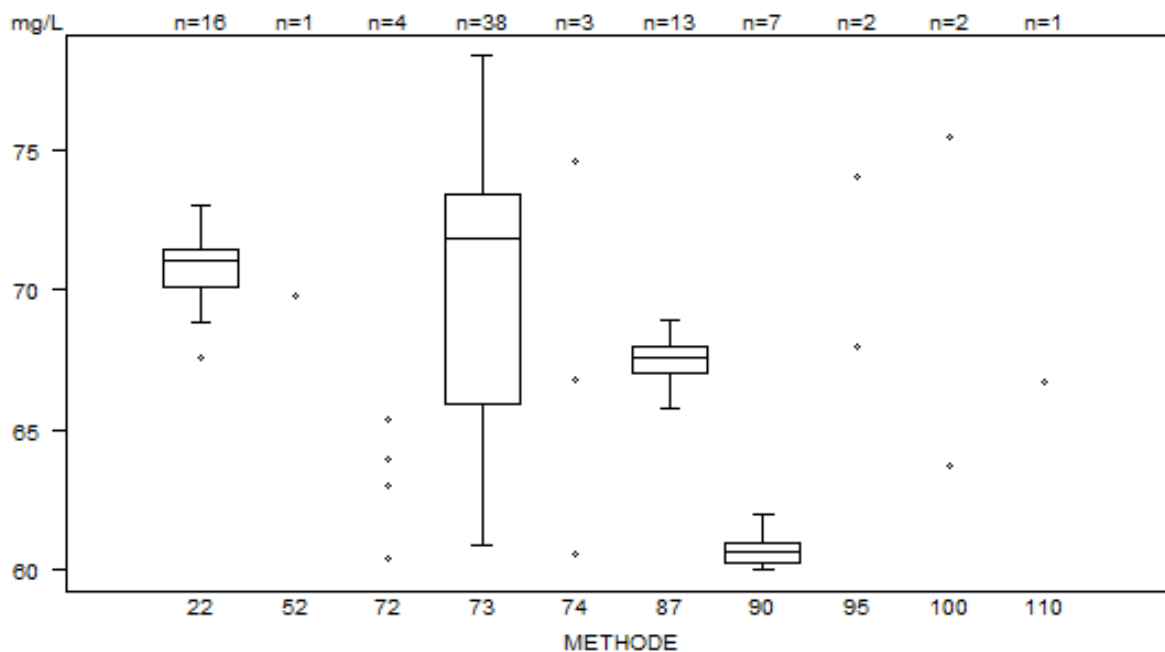


Nombre de citations pour le Paracétamol: Échantillon R/22041

Méthode	Z-citatie
022 Abbott	1

* dParacetamol: 13%/ $\pm$ 4.62 mg/L

PHENYTOÏNE

PHENYTOÏNE - d (%) : 16.0		R/22041			
METHODE		Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
019 Abbott Architect - Chemiluminescence		17.8 20.8			2
022 Abbott Alinity		22.5	0.4	1.8	12
074 Roche / Hitachi Mod cobas c		21.1	1.6	7.5	12
076 Roche / Hitachi cobas c 503		22.4	1.9	8.3	18
087 Siemens Atellica CH		25.1	0.9	3.5	10
090 OCD Vitros		22.0 24.4	22.9 25.8	24.3	5
101 LC-MS/MS		21.5	22.0	24.2	3
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)		22.5	1.9	8.6	62

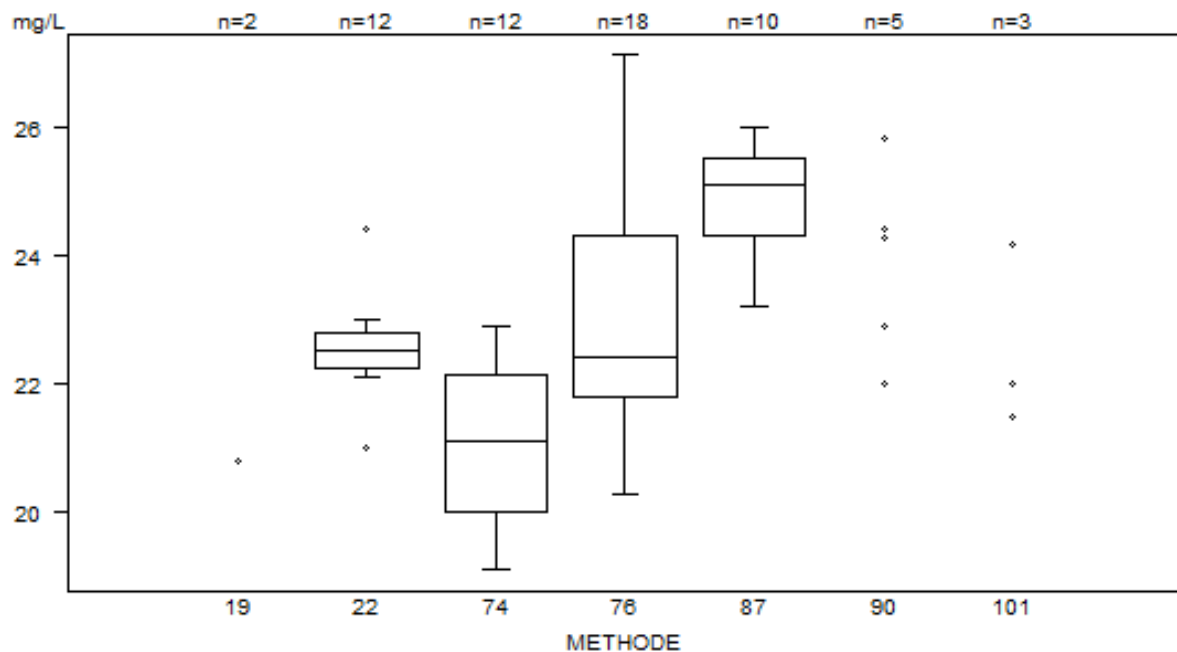

Données hors graphe

Méthode Résultat
19 = 17.8 mg/L


Nombre de citations pour la Phenytoïne: Échantillon R/22041

Méthode	Z-citatie	U-citatie
022 Abbott Alinity	2	0
076 Roche / Hitachi cobas c 503	0	1

* dFenytaine: 16%

ACIDE VALPROÏQUE

ACIDE VALPROÏQUE - d (%) : 12.0		R/22041			
METHODE		Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
002 Abbott Architect - CMIA		81.8 83.0			2
017 Olympus		88.3	97.4	105.6	3
020 Roche Hit / Mod / cobas c		89.3	7.9	8.8	19
022 OCD Vitros		101.2	5.0	4.9	6
025 Abbott Alinity		88.7	2.7	3.0	20
076 Roche / Hitachi cobas c 503/ c 703 / Pro / Pure		84.4	3.3	3.9	30
078 Thermo Scientific - CEDIA		90.0			1
087 Siemens Atellica CH		91.6	1.4	1.6	16
100 LC-MS		86.3			1
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)		88.4	5.3	6.0	98

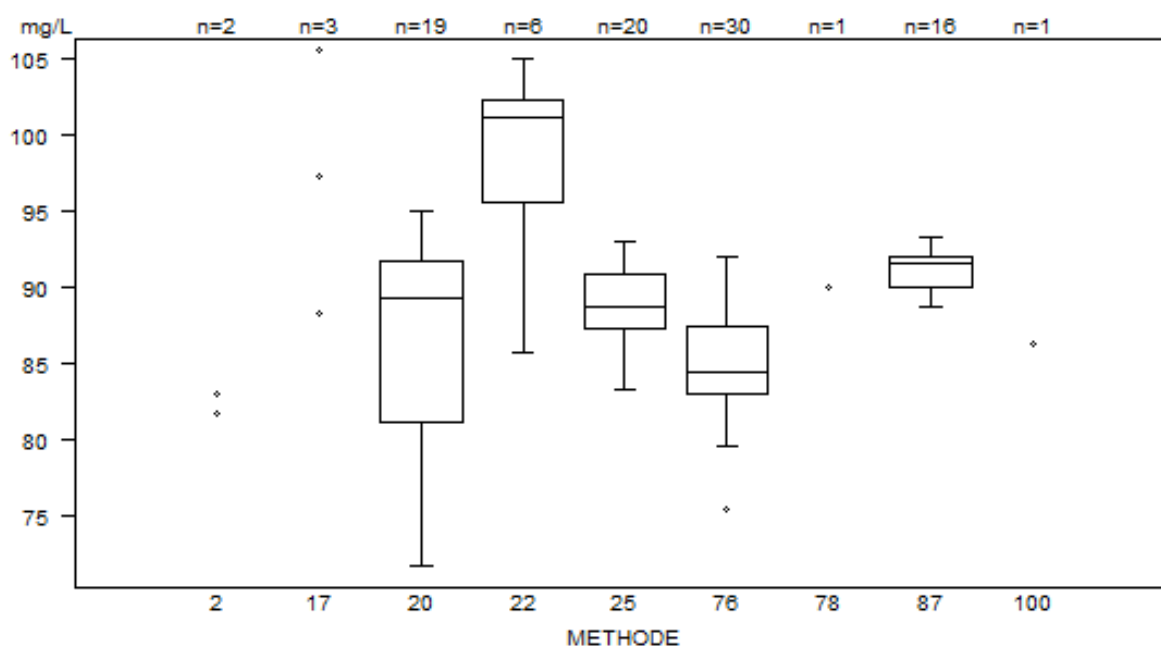

Nombre de citations pour l'Acide valproïque: Échantillon R/22041


Méthode	Z-citatie	U-citatie
020 Roche Hit / Mod / cobas c	0	2
022 OCD Vitros	1	1

* dAcide valproïque: 12%

VANCOMYCINE

VANCOMYCINE - d (%) : 12.0		R/22041			
METHODE		Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
004 Beckman Coulter - Emit		25.5			1
012 OCD Vitros		24.9	0.6	2.4	6
018 Abbott Alinity		27.7	0.7	2.4	21
019 Abbott Architect		29.0			1
022 Roche/Hitachi cobas c - Integra (Gen.3)		26.0	1.0	3.7	15
032 Thermo Scientific		22.7	27.1	30.1	3
076 Roche / Hitachi cobas c 503		26.7	0.7	2.5	27
087 Siemens Atellica CH		26.1	0.8	3.1	13
Résultats globaux (toutes méthodes et tous systèmes de mesure)		27.0	1.3	4.7	87

L'analyse de la stabilité des résultats de la Vancomycine obtenus lors de cette enquête pour l'échantillon R/22041 n'est pas satisfaisante. On constate une tendance à l'augmentation des citations Z en fonction du jour de l'analyse (corrélation de Spearman, valeur Pz -scores = 0.0071 et valeur Pu -scores = 9×10^{-4}). Ce paramètre ne sera donc pas évalué.

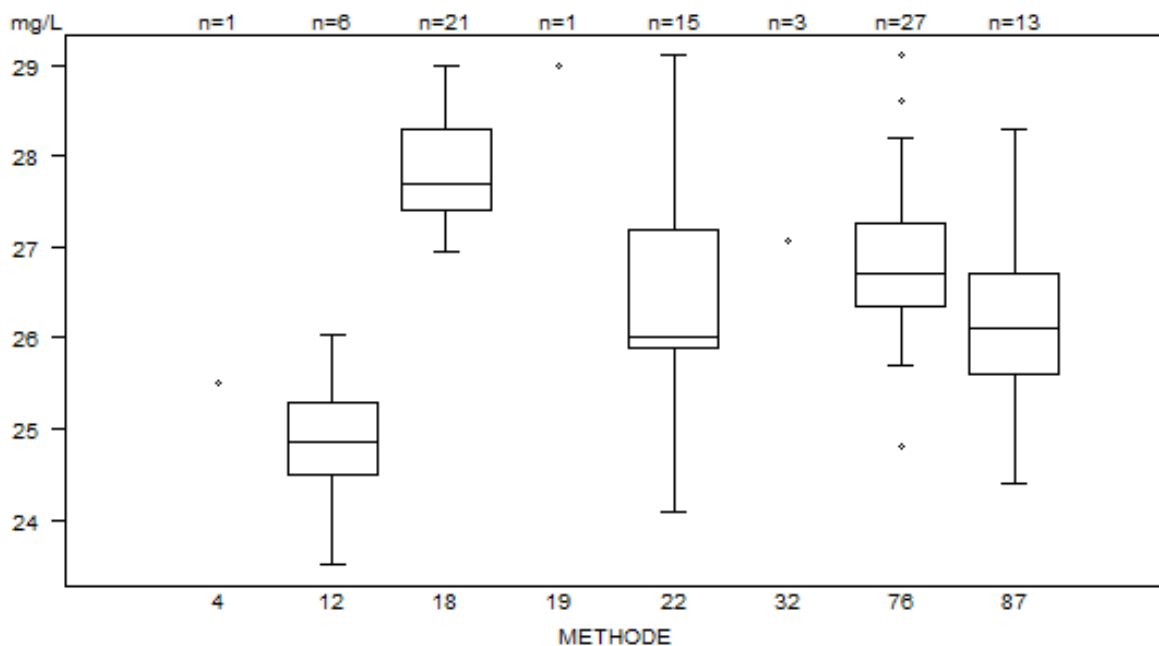

Données hors graphe

Méthode Résultat

32 = 22.7 mg/L

32 = 30.1 mg/L

Nombre de citations pour la Vancomycine: Échantillon R/22041

Méthode	Z-citatie	U-citatie
022 Roche/Hitachi cobas c - Integra (Gen.3)	1	0
076 Roche / Hitachi cobas c 503	1	0

* dVancomycine: 12%

FIN

© Sciensano, Bruxelles 2026.

Ce rapport ne peut pas être reproduit, publié ou distribué sans l'accord de Sciensano. Les résultats individuels des laboratoires sont confidentiels. Ils ne sont transmis par Sciensano ni à des tiers, ni aux membres de la Commission, des Comités d'experts ou du groupe de travail EEQ.